


Instrucciones del usuario para pacientes

XTEND CONNECT A100

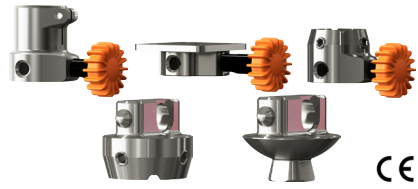

XTEND CONNECT

GUÍA DE TAMAÑOS Y PESOS


El peso máximo para usar Xtend Connect es de 100 kg. Nunca se debe superar el peso máximo.

XTEND CONNECT Y SUS DIFERENTES COMPONENTES

Xtend Connect está formado por dos componentes:

Unidad de ajuste rápido; se puede abrir y cerrar mediante una rueda de bloqueo y un botón de seguridad.

Unidad de base; encaja dentro de la unidad de ajuste rápido.

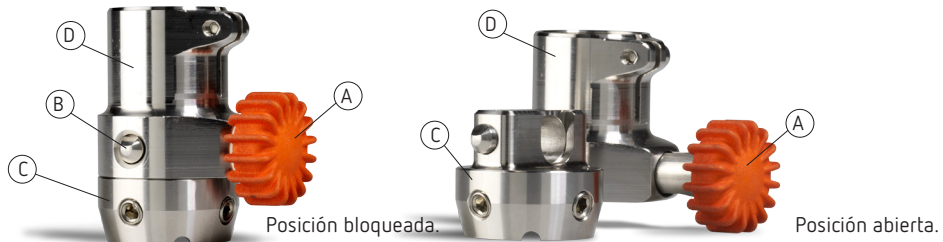


A) Rueda de bloqueo
B) Botón de seguridad

C) Unidad de base
D) Unidad de ajuste rápido

Existen diferentes variantes de Xtend Connect que se ajustan a diversas prótesis.

La variante elegida para usted está marcada con una cruz.

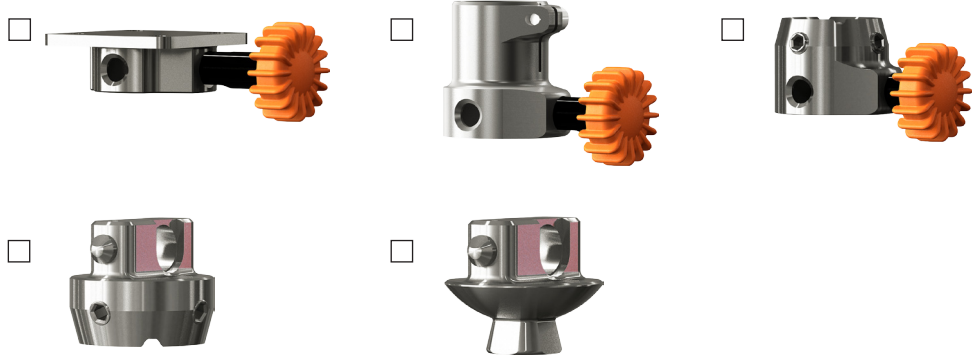

CÓMO CONECTAR Y QUITAR LA UNIDAD DE XTEND CONNECT PARA CAMBIAR DE COMPONENTE PROTÉSICO (P. EJ., CAMBIAR DE PIE)

Es importante que siga estos pasos al conectar y quitarse Xtend Connect.

1. Antes de conectar, desconectar o cambiar los componentes protésicos, asegúrese de tener a su alcance todos los componentes. **ESTO ES MUY IMPORTANTE** ⚠️
2. Antes de conectar, desconectar o cambiar los componentes protésicos, siéntese en una silla, un taburete o un banco que sean estables.
3. Compruebe que tiene a mano todos los componentes, incluida la pieza de prótesis que desee ponerse.
4. Abra del todo la rueda de bloqueo girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Siga girándola hasta que la rueda llegue a su posición exterior. Para verificar que la rueda está en su posición exterior, puede presionar ligeramente la parte externa de la rueda. Si la rueda se comporta como un muelle y se retrae directamente, significa que está en su posición exterior.
5. Presione el botón de seguridad y separe la unidad de base de la unidad de ajuste rápido (imagen 1). Resulta útil tener debajo una alfombra blanda o sujetar la unidad protésica con la mano libre.
6. Coja el otro componente protésico y presione el componente macho de la unidad de base contra el componente hembra de la unidad de ajuste rápido. Escuche atentamente para comprobar que suene el chasquido del botón de seguridad. Tenga cuidado para evitar que los dedos de la mano se queden atrapados al colocar las piezas. No agarre el Xtend Connect al acoplar las piezas. Si lo hace, se le pueden quedar atrapados los dedos de la mano (imagen 2).
7. Cuando las piezas estén acopladas entre sí, presione la rueda y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla (imagen 3). Siga enroscándola en sentido horario hasta que la rueda haya girado todo lo posible y se detenga (imagen 4).



Imagen 1

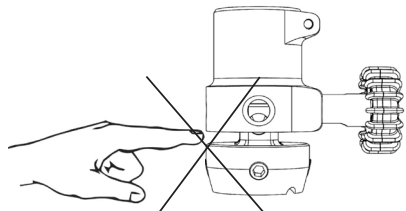


Imagen 2

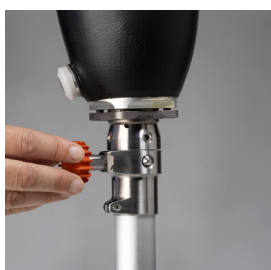


Imagen 3



Imagen 4

8. Compruebe que la nueva pieza protésica está estable moviéndola ligeramente de un lado a otro. Debe permanecer fija en su sitio y las piezas no deben girar ni hacer ningún ruido. Si suena algún ruido, apriete la rueda de bloqueo hasta la posición en que esté totalmente bloqueada.
9. Cuando haya terminado, puede levantarse y seguir usando su prótesis de pierna como de costumbre.

Lindhe Xtend AB

Olofsdalsvägen 40 B, 302 41 Halmstad, Suecia

info@lindhe.se

Teléfono: +46 (0)35 262 92 00

www.lindhextend.com

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Debe limpiar ambas partes de Xtend Connect una vez a la semana como mínimo. Recomendamos que utilice agua tibia y un producto limpiador suave. Haga lo siguiente:

1. Qútese la pierna protésica. *Consejo: Siéntese en una silla para realizar la limpieza.*
2. Separe los componentes en dos partes.
3. Limpie ambos componentes. Estos deben permanecer fijados a sus respectivas partes de la pierna protésica. Puede introducirlos en una bañera o sujetarlos bajo el agua corriente. Frótelos ligeramente con un producto limpiador suave. *Consejo: Pueden resultarle útiles los bastoncillos de algodón.*
4. Enjuague con cuidado.
5. Pase un papel o un paño seco que no suelte pelusa, de manera que las superficies queden limpias y secas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Si el producto emite algún ruido o si es difícil desmontarlo o acoplarlo, separe las piezas y limpie el conector de ajuste rápido. Consulte las instrucciones. Si no se resuelve el problema, consulte a su protésico.
- Xtend Connect es resistente al agua. Si lo sumerge en agua, especialmente en agua salada o de piscina, enjuague el componente para evitar que se acumulen depósitos de sal o cloro, ya que esto puede impedir que el producto se ajuste con facilidad y suavidad.
- Si el componente ha estado expuesto a arena, tierra o suciedad, separe ambas partes y límpielas siguiendo las instrucciones de limpieza.
- Este componente se ha diseñado para utilizarse en un intervalo de temperaturas de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ⚠️ Si su peso supera los 100 kg, póngase en contacto con su protésico inmediatamente. El peso máximo para utilizar este componente es de 100 kg y no se puede exceder.
- Si suele levantar cargas pesadas y, al sumarlas a su peso, se sobrepasan los 100 kg, no debe utilizar Xtend Connect. El peso máximo es de 100 kg y no se puede superar.
- Observe si se produce algún cambio o merma en el funcionamiento; por ejemplo, si aumenta la holgura, si está más rígido tras realizar una sustitución o si gira lateralmente. Si esto ocurre, contacte con su protésico y no utilice el producto hasta que se haya examinado su funcionamiento.
- Recomendamos que un protésico inspeccione Xtend Connect cada seis meses. Si se le da un uso muy activo, puede que sea necesario acortar los intervalos de mantenimiento.
- ⚠️ Este producto no es adecuado para las carreras de alta intensidad.

CÓMO CONECTAR Y QUITAR XTEND CONNECT (P. EJ., PARA PONERSE PANTALONES CEÑIDOS)

Es importante que siga estos pasos al conectar y quitarse Xtend Connect. Cuando necesite ponerse pantalones ajustados, recuerde lo siguiente:

Después de quitarse las piezas protésicas utilizando Xtend Connect, póngase los pantalones ceñidos cubriendo la parte superior de la prótesis y suba la pernera del pantalón hasta donde lo permita su conector (imagen 5). A continuación, puede volver a conectar Xtend Connect y tirar de los pantalones hacia abajo para cubrir la parte inferior de la pierna protésica y seguir vistiéndose (imagen 6). No olvide que siempre debe estar sentado al quitarse o conectar Xtend Connect.



Imagen 5



Imagen 6

⚠️ ADVERTENCIAS PARA EL PACIENTE

- No debe quitarse Xtend Connect mientras está de pie. Si lo hace, puede caerse.
- Tenga cuidado para evitar que los dedos de la mano se queden atrapados al colocar Xtend Connect (imagen 2).
- No camine con Xtend Connect si las piezas no están colocadas adecuadamente y bloqueadas correctamente. Si lo hace, puede caerse y lesionarse.
- Si hace calor, tenga cuidado con las partes de Xtend Connect que puedan estar calientes.
- No utilice productos de limpieza muy ácidos y alcalinos cuando limpie los componentes de Xtend Connect.
- Este producto no es adecuado para las carreras de alta intensidad.
- Recuerde que la arena, la tierra y la suciedad pueden dificultar las tareas de colocar y quitar Xtend Connect, por ejemplo, cuando se usa en la playa.
- Este producto solo debe ser instalado en una prótesis por un protésico cualificado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuál es el peso máximo para usar Xtend Connect?

El peso máximo para usar Xtend Connect es de 100 kg.

¿Qué otros componentes, como articulaciones de rodilla, son compatibles con Xtend Connect?

Xtend Connect encaja con la mayoría de los sistemas con pirámides hembra o macho, sistemas de tubo de 30 mm o sistemas de 4 orificios.

Xtend Connect hace ruido. ¿Cómo puedo corregirlo?

Debe analizarse la causa del ruido. Empiece por limpiar Xtend Connect y volver a probarlo a continuación. Si esto no ayuda, póngase en contacto con su protésico cuanto antes y, mientras tanto, no utilice Xtend Connect.

¿Puedo correr con Xtend Connect?

Xtend Connect es adecuado para correr como actividad de baja intensidad, pero no para carreras de alta intensidad. Consulte a su protésico.

¿Puedo nadar con Xtend Connect?

Sí, Xtend Connect es resistente al agua salada y de piscina. No obstante, es importante que los componentes que conecte también estén diseñados para este uso. Consulte a su protésico.

Mi prótesis está sucia. ¿Cómo puedo limpiarla?

Xtend Connect se puede separar en dos partes, igual que durante su uso habitual. Siga las instrucciones de limpieza que aparecen en el manual del usuario.

Xtend Connect se queda atascado cuando intento montarlo. ¿Qué debo hacer?

Xtend Connect debería ser fácil de montar. Primero, asegúrese de que no haya suciedad, tierra ni arena en las superficies de conexión y compruebe que no hayan entrado piedras en la conexión. Siga las instrucciones de limpieza que aparecen en el manual del usuario. Si el problema persiste, consulte a su protésico.

La rueda de bloqueo de Xtend Connect se desbloquea con demasiada facilidad.

La rueda de bloqueo debe quedar bastante firme para que el bloqueo sea seguro. Si está demasiado suelta, póngase en contacto con su protésico para analizar la causa. No utilice el producto hasta que haya consultado a su protésico.

Xtend Connect está suelto. ¿Qué debo hacer?

Asegúrese de que la rueda de bloqueo esté enroscada correctamente. Presiónela y gírela al mismo tiempo, y enrósquela todo lo posible hasta que la rueda haya girado. Si esto no funciona, desmonte Xtend Connect y límpielo siguiendo las instrucciones de limpieza. Vuelva a montarlo. Si no funciona, póngase en contacto con su protésico.

¿Cuánto debo apretar la rueda de bloqueo?

Debe apretarla hasta que se detenga. Si Xtend Connect está suelto o hace ruido, es probable que no la haya apretado correctamente. Apriétela un poco más.