



LINDHE XTEND

make it possible



XTEND CONNECT

XTEND CONNECT

Wenn Prothesenträger die Kontrolle über ihre Prothese selbst übernehmen



Arretiert.



Geöffnet.

Xtend Connect ist eine vollkommen neue Lösung für eine Reihe von Problemen, denen Prothesenträger gegenüber stehen. Mithilfe von Xtend Connect können Sie verschiedene Prothesenkomponenten in einer einzigartigen und individuellen Art und Weise kombinieren – ganz nach den Lebensumständen und Aktivitäten des Benutzers.

Ist der Alltag ein ständiger Kampf mit ständigen Anpassungen der Beinprothesen für verschiedene Aktivitäten? Kein Problem mehr! Mit Xtend Connect können Sie schnell von einem Aktivfuß auf einen Alltagsfuß wechseln und dabei denselben Adapter weiterverwenden. Somit müssen Sie keine kompletten Sets mehr mit sich herumtragen. Oder Sie wechseln schnell von einem Fuß mit Absatz zu einem Alltagsfuß – ohne dabei die wichtigen Einstellungen durcheinanderzubringen.

Sie tun sich schwer, einen guten Adapter zu finden, und die Kopie ist nie gleich gut? Kein Problem mehr! Sobald Sie den richtigen Adapter gefunden haben, können Sie denselben Adapter für mehrere unterschiedliche Aktivitäten verwenden, indem Sie die anderen Komponenten schnell und problemlos wechseln.

Es fällt Ihnen schwer, Straßenschuhe auszuziehen? Kein Problem mehr! Bei Xtend Connect nehmen Sie einfach den

Fuß mit dem Straßenschuh ab und wechseln auf Ihren Fuß für den Innenbereich. Dieser ist dann natürlich für die Verwendung im Innenbereich richtig eingestellt. Dies ist viel einfacher und schneller als das An- und Ausziehen eines Schuhs bei einer steifen Fußprothese.

Probleme beim Anziehen enger Hosen? Kein Problem mehr! Mit Xtend Connect nehmen Sie den Fuß einfach ab und ziehen die Hose an. Durch eine schnelle Bewegung mit einer Hand wird der Fuß wieder angelegt und die enge Hose passt perfekt.

Sie bringen in Ihrem Koffer nicht alles unter? Kein Problem mehr! Bei der Verwendung von Xtend Connect müssen Sie keine kompletten Beinprothesen mehr einpacken. Nehmen Sie einfach einen zusätzlichen Fuß für Ausflüge oder Ihren Badefuß mit, und einer Reise mit leichtem Gepäck steht nichts mehr im Wege.

Tipps für die Anpassung von Xtend Connect

Xtend Connect verfügt über ein hohes Maß an integrierter Flexibilität und ist für die meisten Konfigurationen geeignet.



FUSS WECHSELN:

Achten Sie aufgrund der unterschiedlichen Höhe verschiedener Füße darauf, Xtend Connect so hoch wie möglich an der Röhre anzubringen, an der die Fußprothese befestigt wird. Auf diese Weise können Sie Anpassungen für unterschiedlich hohe Fußprothesen vornehmen, indem Sie die Verbindungsröhre auf die richtige Höhe kürzen. Es ist für den Prothesenträger auch einfacher, den Fuß zu wechseln, wenn man sich an der Röhre festhalten kann.

Denken Sie auch daran, dass Sie zwei niedrigere Komponenten für die verschiedenen Füße bestellen müssen.

Wenn der Patient Anspruch auf zwei verschiedene Arten von Aktivprothesen hat, ist Xtend Connect ein hervorragendes Produkt, um sich eine komplette Beinprothese zu sparen. Indem man stattdessen ein Xtend Connect als Basis wählt und es beispielsweise mit einem Sportfuß ergänzt, entstehen geringere Kosten als für eine komplette Beinprothese.



HOSE WECHSELN:

Hierbei können Sie Xtend Connect anbringen, wo Sie wollen. Je niedriger sich der Anschluss für die Fußprothese jedoch befindet, desto einfacher ist das Anziehen von engen Hosen.



KNIEGELENK WECHSELN:

Denken Sie daran, dass das Wechseln des Kniegelenks für den Prothesenträger harte Arbeit bedeuten kann und dass häufig beide Hände für den Wechsel benötigt werden.

Die Ausrichtung ist entscheidend und wird am einfachsten erreicht, wenn Sie den Pyramidenadapter mit Buchse als Verbindungskomponente zum Kniegelenk verwenden.

Scheuen Sie nicht davor zurück, Xtend Connect zu drehen, sodass die Schnellkupplung nach unten zeigt. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Komponente und kann für den Patienten manchmal einfacher zu handhaben sein.

Checkliste:

- Behalten Sie Ihren Lieblingsadapter bei und sparen Sie Platz.
- Praktisch für Reisen: Das Einpacken mehrerer kompletter Beinprothesen ist nicht notwendig.
- Wechseln Sie den kompletten Fuß anstatt nur die Schuhe: Dies ist viel einfacher und schneller.
- Geringere Kosten für Aktivprothesen.
- Größere Auswahl an Komponenten und somit bessere Lebensqualität.
- Doppelte Verordnungen für komplette Beinprothesen werden vermieden.



XTEND CONNECT UND SEINE VERSCHIEDENEN KOMPONENTEN

Ein Xtend Connect Basis-Set besteht aus zwei Hauptkomponenten:

SCHNELLKUPPLUNG. Die Schnellkupplung kann mithilfe eines Feststellrads und eines Sicherheitsdruckknopfs geöffnet und geschlossen werden.


BASISKOMPONENTE. Die Basiskomponente passt in die Schnellkupplung.

Jede Xtend Connect Komponente verfügt über mehrere Optionen für den Anschluss anderer Prothesenkomponenten. Es stehen mehrere Anschlüsse für die optimale Anpassung an befestigte Komponenten zur Verfügung.


Alle Anschlusslösungen können auch wie in der nachfolgenden Abbildung frei kombiniert werden. Alle Komponenten können in jede Richtung gedreht werden.

- A) Feststellrad
- B) Sicherheitsdruckknopf

- C) Basiskomponente
- D) Schnellkupplung

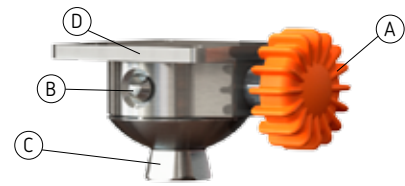

Geschlossen und arretiert.

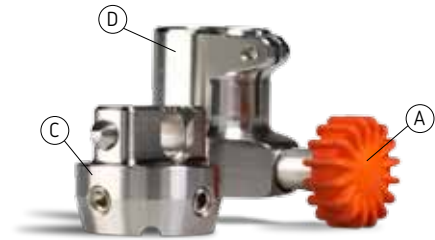

Geöffnet und getrennt

Schnellkupplungen

Artikelnummer	Bild	Beschreibung
A100-Q30		Xtend Connect Schnellkupplung mit Röhrenklemme, 30 mm
A100-Q30-B		Xtend Connect Schnellkupplung mit Röhrenklemme, 30 mm
A100-Q4		Xtend Connect Schnellkupplung mit 4-fach-Adapter*
A100-Q4-B		Xtend Connect Schnellkupplung mit 4-fach-Adapter*
A100-QF		Xtend Connect Schnellkupplung mit Pyramidenadapter mit Buchse*
A100-QF-B		Xtend Connect Schnellkupplung mit Pyramidenadapter mit Buchse*

Basiskomponenten

Artikelnummer	Bild	Beschreibung
A100-BF		Xtend Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter mit Buchse
A100-BM		Xtend Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter mit Stecker*

Material: Edelstahl
 Höchstgewicht: 100 kg
 Vergewissern Sie sich stets, dass das Patientengewicht korrekt ist. Das Höchstgewicht darf niemals überschritten werden.



Lindhe Xtend AB
 Linjegatan 3D, SE-302 50 Halmstad, Schweden, +46 (0)35 262 92 00
 info@lindhe.se, www.lindhextend.com