


Istruzioni per l'uso Pazienti

XTEND CONNECT A100

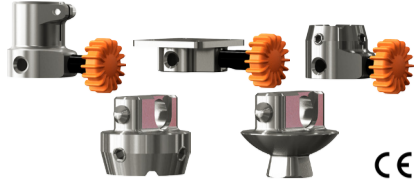

XTEND CONNECT

GUIDA ALLE MISURE E AI PESI


Xtend Connect può sopportare un peso massimo di 100 kg. Non superare mai il peso massimo.

XTEND CONNECT E I SUOI DIVERSI COMPONENTI

Xtend Connect è costituito da due componenti:

Raccordo rapido: può essere aperto e chiuso mediante una rotella di bloccaggio e un pulsante di sicurezza


Unità di base: si inserisce nel raccordo rapido.

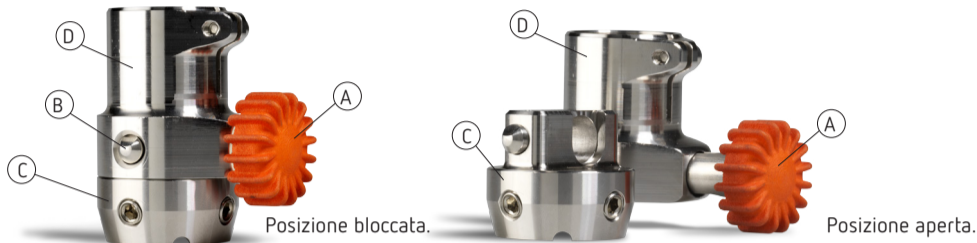

A) Rotella di bloccaggio
B) Pulsante di sicurezza

C) Unità di base
D) Raccordo rapido

Xtend Connect è disponibile in diverse varianti per adattarsi a protesi differenti. La variante che Le è stata installata è contrassegnata con una crocetta.

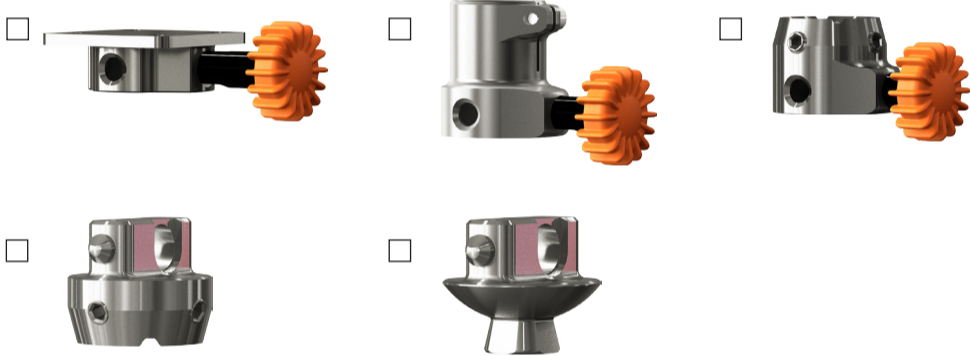

COLLEGARE O RIMUOVERE XTEND CONNECT PER CAMBIARE UN COMPONENTE PROTESICO CON UN ALTRO, ES. UN ALTRO PIEDE

È importante seguire questi passaggi quando si collega e rimuove Xtend Connect.

1. Accertarsi di avere a portata di mano tutti i componenti prima di collegare, scollegare o cambiare componenti protesici. **QUESTO È MOLTO IMPORTANTE** ⚠️
2. Sedersi su una sedia, sgabello o panca stabile prima di collegare, scollegare o cambiare componenti protesici.
3. Verificare nuovamente di avere a portata di mano tutti i componenti, inclusa la parte di protesi che si desidera installare.
4. Aprire completamente la rotella di bloccaggio ruotandola in senso antiorario. Continuare a ruotarla finché essa non scorre in posizione esterna. Verificare che la rotella abbia raggiunto la sua posizione più esterna premendo leggermente la sua parte esterna. Se la rotella appare elastica e balza all'indietro, significa che si trova nella sua posizione più esterna.
5. Premere il pulsante di sicurezza e sganciare l'unità di base dal raccordo rapido (Fig. 1). È utile avere un tappetino morbido sotto di sé o afferrare l'unità protesica con la mano libera.
6. Prendere l'altro componente protesico e spingere l'elemento maschio dell'unità di base nell'elemento femmina del raccordo rapido. Si deve udire lo scatto del pulsante di sicurezza. Fare attenzione a non rimanere intrappolati con le dita quando si installano i componenti. Non tenere in mano Xtend Connect quando si innestano le parti tra loro. In caso contrario, sussiste il rischio di rimanere intrappolati con le dita (Fig. 2).
7. Una volta che i pezzi si sono innestati tra loro, premere la rotella e ruotarla in senso orario per bloccarla (Fig. 3). Continuare ad avvitare in senso orario finché la rotella non raggiunge la sua posizione più lontana e si arresta (Fig. 4).



Fig. 1

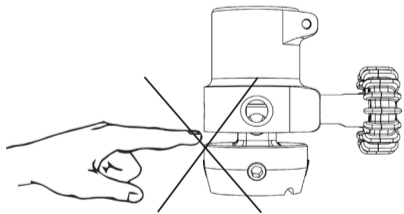


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

8. Verificare che il nuovo componente protesico sia stabile scuotendolo leggermente. Deve risultare fisso in posizione e le parti non devono ruotare o fare rumore. Se il componente produce un rumore, stringere la rotella di bloccaggio fino a bloccarla completamente.
9. A questo punto ci si può alzare e utilizzare la protesi di gamba come sempre.



Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40 B, 302 41 Halmstad, Svezia
info@lindhe.se
Telefono: +46 (0)35 262 92 00
www.lindhextend.com

ISTRUZIONI DI PULIZIA:

Pulire i due componenti di Xtend Connect almeno una volta alla settimana. Si raccomanda l'uso di acqua tiepida e di un blando detergente. Procedere come segue:

1. Rimuovere la protesi di gamba. *Suggerimento: sedersi su una sedia per pulirla.*
2. Separare i componenti tra loro.
3. Pulire entrambi i componenti. Devono rimanere collegati alle rispettive parti della protesi di gamba. È anche possibile immergerli in un bagno o tenerli sotto l'acqua corrente. Strofinare leggermente con un blando detergente. *Suggerimento: può essere utile usare bastoncini di cotone.*
4. Risciacquare accuratamente.
5. Passare un panno asciutto privo di filacce o della carta in modo da lasciare le superfici pulite e asciutte.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Se il dispositivo produce rumori oppure è difficile dividerlo o ricongiungerlo, separare le parti e pulire il connettore rapido. Vedere le istruzioni. Se ciò non risolve il problema, consultare il protesista.
- Xtend Connect è impermeabile. Se viene immerso in acqua, soprattutto acqua salata o di piscina, risciacquare il componente per prevenire la formazione di depositi di sale o cloro, che potrebbero ostacolare una regolare e facile installazione.
- Se il componente è stato esposto a sabbia o sporcizia, separare le due parti e pulirle secondo le istruzioni di pulizia.
- Il componente è progettato per l'uso a temperature comprese tra -20 °C e +80 °C.
- ⚠️ Qualora il proprio peso dovesse aumentare oltre i 100 kg, contattare immediatamente il protesista. Il componente può sopportare un peso massimo di 100 kg, che non deve essere superato.
- Se si sollevano spesso grossi pesi che, sommati al proprio peso, superano i 100 kg, non si deve utilizzare Xtend Connect. Il peso massimo è di 100 kg e non deve essere superato.
- Prestare attenzione a eventuali variazioni o perdite di funzionalità, come un allentamento, una rigidità dopo la reinstallazione o una rotazione laterale. In questi casi, rivolgersi al protesista e non usare il prodotto finché non ne sia stata esaminata la funzionalità.
- Si raccomanda di fare ispezionare Xtend Connect da un protesista ogni sei mesi. In caso di utilizzo molto attivo, potrebbero essere necessari interventi di assistenza più frequenti.
- ⚠️ Il prodotto non è idoneo per la corsa a ritmo sostenuto.

COLLEGARE E RIMUOVERE XTEND CONNECT AD ESEMPIO PER INDOSSARE PANTALONI ATTILLATI

È importante seguire questi passaggi quando si collega o rimuove Xtend Connect. Quando si desidera indossare pantaloni attillati, ricordare quanto segue:

Dopo aver rimosso le parti di protesi mediante Xtend Connect, indossare i pantaloni attillati sulla parte superiore della protesi e tirare verso l'alto la gamba del pantalone fin dove l'attacco della protesi lo consente (Fig. 5). È quindi possibile ricollegare Xtend Connect, abbassare i pantaloni sulla parte inferiore della protesi di gamba e continuare a vestirsi (Fig. 6). Ricordarsi sempre di sedersi quando si deve rimuovere / collegare Xtend Connect.



Fig. 5



Fig. 6

⚠️ AVVERTENZE PER IL PAZIENTE

- Xtend Connect non deve essere rimosso mentre si sta in piedi. Ciò può causare cadute.
- Fare attenzione a non rimanere intrappolati con le dita quando si installa Xtend Connect (Fig. 2).
- Non camminare indossando Xtend Connect se le parti non sono correttamente installate e bloccate. Ciò può causare cadute e lesioni.
- In ambienti caldi, verificare che non vi siano parti di Xtend Connect surriscaldate.
- Evitare l'uso di detersivi molto acidi e alcalini per pulire i componenti di Xtend Connect.
- Il prodotto non è idoneo per la corsa a ritmo sostenuto.
- Ricordare che sabbia e sporcizia possono ostacolare l'installazione e la rimozione di Xtend Connect, es. per l'uso in spiaggia.
- Questo prodotto deve essere esclusivamente installato su una protesi da un protesista qualificato.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è il peso massimo che Xtend Connect può sopportare?

Xtend Connect può sopportare un peso massimo di 100 kg.

Su quali altri componenti, es. articolazioni di ginocchio, può essere installato Xtend Connect?

Xtend Connect è installabile sulla maggior parte dei sistemi provvisti di adattatore a piramide femmina o maschio, di tubo di connessione da 30 mm o di attacco a quattro fori.

Xtend Connect produce un rumore. Come posso correggerlo?

È necessario analizzare la causa del rumore. Per prima cosa, pulire Xtend Connect e quindi riprovarlo. Se il problema non si è risolto, contattare il prima possibile il protesista e nel frattempo non utilizzare Xtend Connect.

Posso correre con Xtend Connect?

Xtend Connect è idoneo per il jogging a ritmo blando, ma non per la corsa a ritmo sostenuto. Discuterne con il protesista.

Posso nuotare con Xtend Connect?

Sì, Xtend Connect è resistente all'acqua salata e di piscina. Ma è importante che anche i componenti da collegare abbiano le stesse caratteristiche. Discuterne con il protesista.

La mia protesi è sporca. Come posso pulirla?

Xtend Connect può essere diviso in due parti, proprio come per l'uso normale. Seguire le istruzioni di pulizia contenute nel manuale d'uso.

Xtend Connect si inceppa quando provo ad assemblarlo. Cosa devo fare?

Xtend Connect deve potersi installare facilmente. Accertarsi dapprima che non vi sia sabbia o sporcizia sulle superfici di collegamento o che non siano penetrate pietre nel raccordo. Seguire le istruzioni di pulizia contenute nel manuale d'uso. Se il problema persiste, consultare il protesista.

La rotella di bloccaggio di Xtend Connect si sblocca troppo facilmente.

La rotella di bloccaggio deve essere abbastanza rigida da consentire un bloccaggio sicuro. Se è troppo allentata, contattare il protesista per ricercarne il motivo. Non utilizzare il prodotto finché non si è consultato il protesista.

XTEND CONNECT si è allentato. Cosa devo fare?

Accertarsi che la rotella di bloccaggio sia correttamente avvitata. Premere la rotella mentre la si ruota e avvitare il più possibile finché non smette di ruotare.

Se il problema persiste, staccare Xtend Connect e pulirlo secondo le istruzioni di pulizia. Reinstallarlo.

Se ciò non funziona, consultare il protesista.

Quanto devo stringere la rotella di bloccaggio?

Stringere la rotella finché non si arresta. Se Xtend Connect è allentato o produce un rumore, probabilmente non è stato stretto correttamente. Occorre stringerlo ancora un po'.