



LINDHE XTEND

xtend your life



XTEND CONNECT

XTEND CONNECT

義足用 迅速交換式 コネクタ



接続時



取り外し時

Xtend Connectは多くの問題に直面している義足ユーザーにとって全く新しいソリューションです。Xtend Connectを使用することによって、義足パーツを生活環境や活動に合わせて迅速に交換することができます。

活動別の義足を取り揃えることは大変ではありませんか？Xtend Connectorを使用すると、現在お持ちのソケットをそのままの状態ですぐに日常用足部から活動用足部へ迅速に交換することができます。複数の義足を持つ必要がありません。またアライメント調整を気にせず、ハイヒール用の足部へ交換することもできます。

良好なソケットに出会うのは簡単ではありませんし、その複製ですら満足できなかったことはありませんか？良好なソケットをお持ちであれば、アクティビティに合わせて、ソケット以下のパーツを交換して対応できます。

靴の脱ぎ履きに苦労していませんか？靴を履いたままの状態ですぐに足部パーツを取り外し、アライメント調

整済みの屋内用の足部パーツに取り換えることが可能なため、屋内に入るたびに靴を取り外す必要がありません。

タイトなズボンを履くことに苦労していませんか？足部パーツを取り外す事で楽にズボンを装着できます。切り離れた足部パーツは簡単にしかもアライメント設定が変わることなく元の状態に戻せます。

旅行、レジャー時の荷物を減らせます。複数の義足を持ち運ぶ代わりに、海水浴用、入浴用等、活動別足部パーツのみを持ち運ぶことにより身軽に移動が可能です。

Xtend Connectorを上手にご利用頂くためのヒント

Xtend Connectorを目的に合わせた箇所に義足構成パーツとして組み込むことにより、活用の幅が広がります。



義足足部の交換を目的とするケースでは:

義足足部ごとに構造的な高さが異なりますので、Xtend Connectorを出来るだけ近位部に取付け、それ以下のパーツを交換した時に義足長が変わらないようにします。



ズボン装着のケースでは:

Xtend Connectorは好きな場所へ取り付けることができますが、できるだけ遠位に取り付ける事でタイトなズボンの装着も簡単に行えます。



膝継手の交換を目的とするケースでは:

本来膝継手の交換は容易ではありません。従来では膝継手交換時にアライメントの再調整(ピラミッドコネクタを使用時)が重要でしたがXtend Connectorを使用すると簡単に交換ができ、しかもアライメントの再調整が不要です。Xtend Connectorは上下どちらでも取り付け可能です。

2個の義足製作を希望される義足ユーザー様にとって、Xtend Connectorは大変優れたパーツです。例えばXtend Connectorを組み込んだ常用義足とスポーツ用足部パーツを用意すれば、義足を2個製作するよりコストを抑えることができます。

チェックリスト:

- ・良好なソケットを使用して複数のパーツを組み替えられます。
- ・旅行、移動時に複数の義足を持ち運ぶ必要がありません。
- ・靴を脱がずに足部ごと簡単に交換できます。
- ・1つのソケットを使用する事により2個義足製作するよりコストを抑えます。
- ・Xtend Connectorは様々な種類からお選び頂けます。




Xtend Connectorは以下の2つの主要部品から構成されます。


クイックフィットユニット: ロッキングホイールとセーフティープッシュボタンでベースユニットを接続するパーツ。

ベースユニット: クイックフィットユニットに接続されるパーツ。

Xtend Connectorは接続される義足構成パーツに応じて対応できるように3種類のクイックフィットユニットと2種類のベースユニットが存在し、自由に組み合わせることができます。

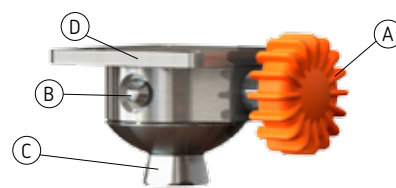

閉鎖、ロックされた位置。
例は、クイックフィットユニットと4穴およびベースオスとの組み合わせです。

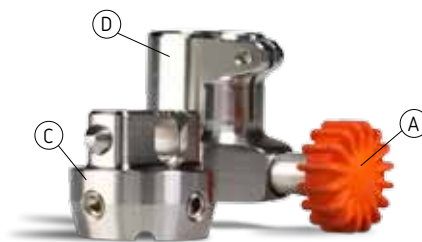

例は、クイックフィットユニット30mmチューブおよびベースメスとの組み合わせです。

- | | |
|------------------|-----------------|
| A) ロッキングホイール | C) ベースユニット |
| B) セーフティープッシュボタン | D) クイックフィットユニット |

クイックフィットユニット

| 商品番号 | 説明 |
|------------|---|
| A100-Q30 | Xtend Connectクイックフィットユニット、30mmチューブクランプ付き、オレンジ色バージョン |
| A100-Q30-B | Xtend Connectクイックフィットユニット、30mmチューブクランプ付き、ブラック色バージョン |
| A100-Q4 | Xtend Connectクイックフィットユニット、4穴アダプター付き、オレンジ色バージョン |
| A100-Q4-B | Xtend Connectクイックフィットユニット、4穴アダプター付き、ブラック色バージョン |
| A100-QF | Xtend Connectクイックフィットユニット、メスピラミッドアダプター付き、オレンジ色バージョン |
| A100-QF-B | Xtend Connectクイックフィットユニット、メスピラミッドアダプター付き、ブラック色バージョン |

ベースユニット

| 商品番号 | 説明 |
|---------|-------------------------------------|
| A100-BF | Xtend Connectベースユニット、メスピラミッドアダプター付き |
| A100-BM | Xtend Connectベースユニット、オスピラミッドアダプター付き |

材質:ステンレス鋼
最大重量:100kg
ユーザーの体重が正しいか、必ず確認してください。
最大重量は決して超過しないでください。



Lindhe Xtend AB
Olofsdalsvägen 40B, SE-302 41 Halmstad, Sweden, +46 (0)35 262 92 00
info@lindhe.se, www.lindhextend.com

輸入販売元



株式会社 田沢製作所

〒113-0033 東京都文京区本郷1-35-28 メゾンドール本郷2F
http://www.tazawa.co.jp