

Xtend Connect A100 Teknisk specifikation

Xtend Connect är en patenterad snabbkoppling som tillåter att användaren kopplar isär sin protes i delar för att enklare kunna byta fot, byta byxor eller bara spara plats t ex vid resa. I övrigt fungerar Xtend Connect precis som vilken adapter som helst och har de vanligaste standardinfästningarna för att passa de flesta protesprodukter på marknaden.

Material

Xtend Connect är tillverkad i rostfritt stål. Skruvar är av syrafast stål och låshjulet är i polyamidplast.

Snabbfästet

Snabbfästet finns i tre konfigurationer, 4-hålsadapter, rörklämma 30 mm samt honpyramid. Alla snabbfästen kan kombineras fritt med basenheterna.

Basenheten

Basenheten finns i två varianter, honpyramid och hanpyramid. Alla basenheter kan kombineras fritt med snabbfästet.

Konfiguration

Innan du beställer tänk noga igenom konfigurationen. Ibland kan man behöva två basenheter och i andra fall två snabbfästen. Det är också möjligt att vända enheten åt vilket håll som helst och upp-och-ner. Tips är att tänka till innan du gör hela protesen. Då kan du spara komponenter och därmed

både pengar och vikt. Xtend Connect är precis som en vilken adapter som helst, förutom att den går att ta isär.

Färger på låshjul

Xtend Connect finns i två olika färger, orange och svart. Orange är standard om inget annat anges.

Dubbellåsning

Xtend Connect är den enda produkten på marknaden som har en dubbel säkerhetslåsning, med både en säkerhetsstryckknapp och ett låshjul. Detta garanterar en säker användning för patienten.

Vikt patient

Tillåten maxvikt är 100 kg. Kontrollera alltid att patientens vikt stämmer. Maxvikten får absolut inte överskridas.


Garanterat för användning i vatten

Samtliga delar i Xtend Connect tål användning i salt-, pool- och sötvatten.

Sortiment

Xtend Connect finns i flera konfigurationer och färger.

Snabbfästen:

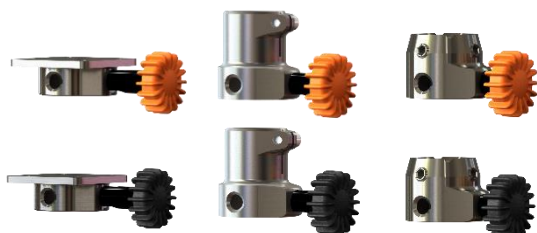

Basenheter:




Artikelnr	Beskrivning
A 100-Q4	Xtend Connect snabbfäste med 4-hålsadapter, orange låshjul
A 100-Q4-B	Xtend Connect snabbfäste med 4-hålsadapter, svart låshjul
A 100-Q30	Xtend Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm, orange låshjul
A 100-Q30-B	Xtend Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm, svart låshjul
A 100-QF	Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, orange låshjul
A 100-QF-B	Xtend Connect snabbfäste med honpyramidadapter, svart låshjul

A 100-BF	Xtend Connect basdel med honpyramidadapter
A 100-BM	Xtend Connect basdel med hanpyramidadapter

Kombinationsmöjligheter

Xtend Connect kan vändas åt alla håll och passar både ovan- och under knä. Med hjälp av de fem grunddelarna kan över 12 olika konfigurationer skapas för att passa många olika patienttyper och proteser.

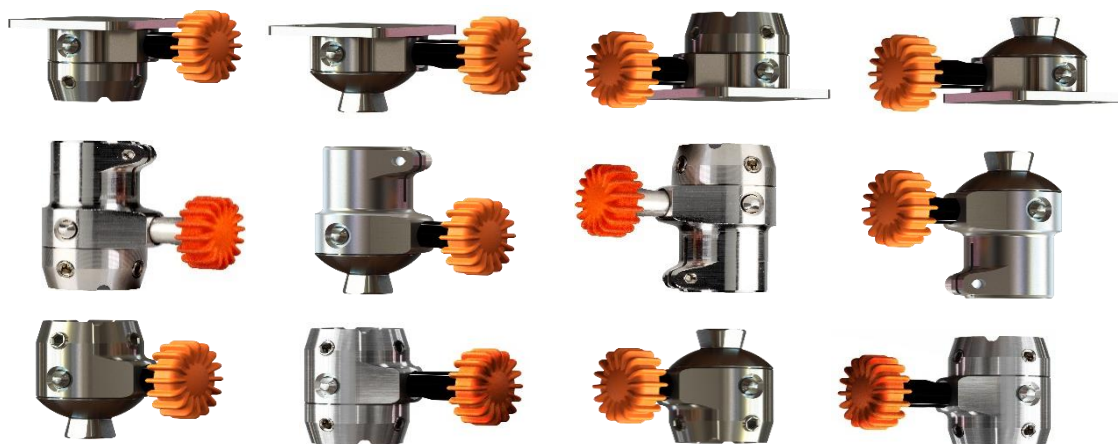

Bygghöjder


Xtend Connect arbetar med tre olika höjder. Alla mått i mm.

A: Funktionshöjd är den höjd som du lägger på extra för att få in funktionen av snabbkoppling.

B: Effektiv höjd är det utrymme som du behöver ha fritt för att kunna passa in Xtend Connect i protesen. Det här måttet är ett cirkamått eftersom det även påverkas av anslutande komponenter.

C: Total höjd.

Combination:	Description	Functional height = A	Effective height = B	Total height = C	Width center to outer wheel locked = D	Total width wheel locked = E
A100-Q4 + A100 BF	Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter	19	39	39	48	74
A100-Q4 + A100 BM	Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter	19	26	39	48	74
A100-Q30 + A100 BF	Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter	19	36	66	38	58
A100-Q30 + A100 BM	Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter	19	23	66	38	58
A100-QF + A100 BF	Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter	19	52	52	38	58
A100-QF + A100 BM	Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter	19	39	52	38	58

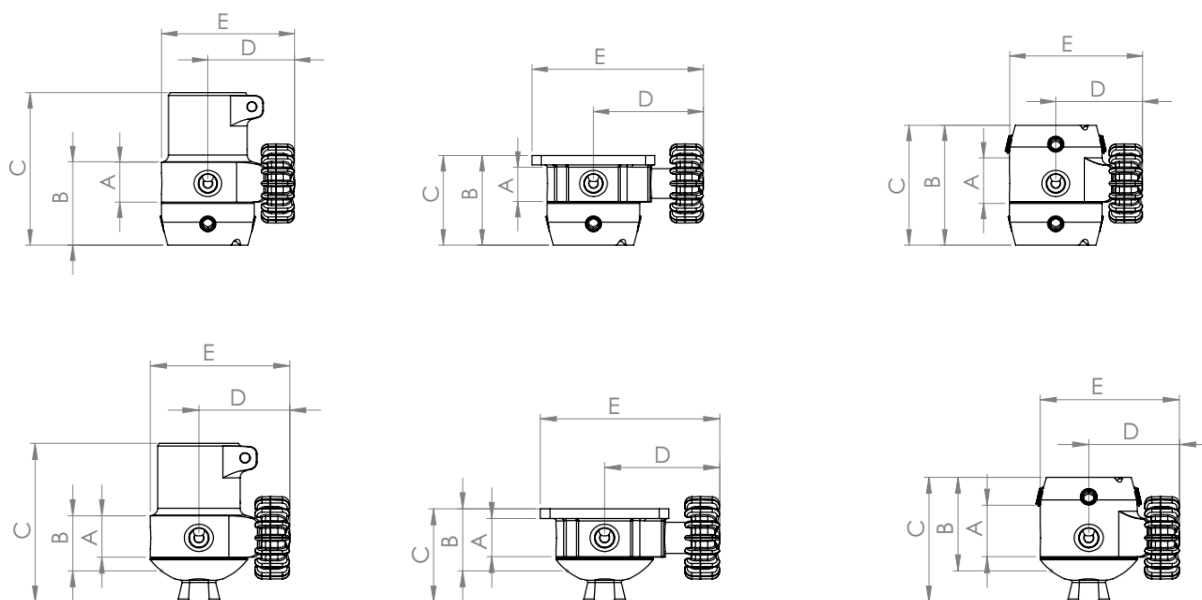

Vikt

Xtend Connect arbetar med två olika viktbegrepp. Alla mått i gram.

A: Effektiv vikt är den vikt du lägger på extra för att få in funktionen av snabbkoppling. Den normala extravikt som en standardkoppling har är därför reducerad. Detta är ett cirkamått eftersom olika standardkopplingar har olika vikt.

B: Total vikt är komponentens totala vikt.

Combination:	Description	Effective weight = A	Total weight = B
A100-Q4 + A100 BF	Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter	208	338
A100-Q4 + A100 BM	Xtend Connect Quick fit unit, 4-holes adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter	208	314
A100-Q30 + A100 BF	Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter	208	330
A100-Q30 + A100 BM	Xtend Connect Quick fit unit, tube clamp 30 mm + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter	208	305
A100-QF + A100 BF	Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, female pyramid adapter	208	303
A100-QF + A100 BM	Xtend Connect Quick fit unit, female pyramid adapter + Xtend Connect Base unit, male pyramid adapter	208	279

Exempel på användningsområden

Med Xtend Connect är det fantasin som sätter gränsen. Här är dock några exempel på vanliga användningsområden:

- Byta mellan vardagsfot och inomhusfot
- Byta mellan sportfot och vardagsfot
- Byta mellan hygienprotes och vanlig protes
- Byta mellan två hylsor och en fot
- Byte mellan vanliga långa proteser till korta stubbisben.
- Lättare ta på tajta byxor
- Resa med proteser, ta bara med t ex extra fot för bad och spara packning och vikt.

	Byta fötter	Byta knän	Byta hylsa	Korta/långa ben	Ta på byxor	Resa
TF enkel	Ja.	Ja	Ja	Nej	Ja	Ja
TF dubbel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TT enkel	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Ja
TT dubbel	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja