

Xtend® Foot H100

Teknisk specifikation

Xtend Foot är en patenterad protesfot som med sina 17 ° sidoflexibilitet nästan fungerar som en mänsklig fot. Den avgörande egenskapen hos Xtend Foot är dess överlägsna sidorörlighet, en säker kompensation på ojämna ytor. En låg flexibilitetspunkt säkerställer en överträffad stabilitet. Detta tack vare sin unika blandning av det anpassningsbara och flexibla materialet glasfiber och kolfiber, ett material som är känt för sin förmåga att skapa energiåtergivning.



Vikt

Lättviktskonstruktion

Ex: Storlek P426 = 399 gram / 0.88 lbs.



Montering

Universell pyramid-adapter som passar alla standardkomponenter på marknaden

Skyddad mot vatten

Garanterad i färsk-, pool- och saltvatten



Material

Glasfiber, kolfiber och titan.

Flexibel

17 ° sidoflexibilitet – jämförbart med en mänsklig fot.



Garanti

Xtend Foot – 36 månader.
Kosmetik – 6 månader.



Max kroppsvikt

150 kg / 339 lbs (storlekskategori P7).



En enhet


Xtend Foot har inga lösa delar.



I lådan

Levereras med kosmetik av termoplastisk elastomer och spektra strumpa

Tekniska fakta Xtend® Foot H100

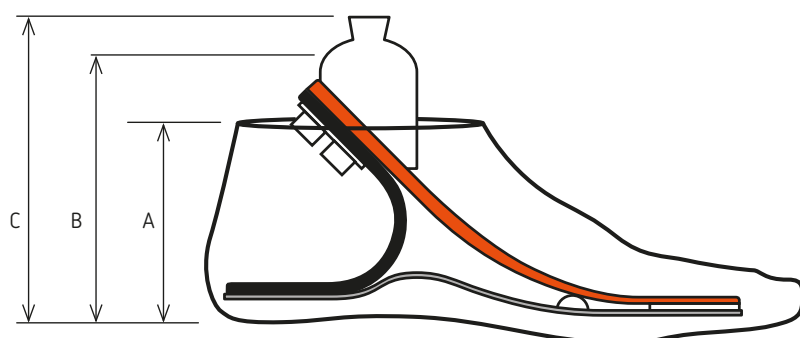

- A Kosmetik höjd i mm
- B Bygghöjd i mm
- C Total höjd i mm

Xtend Foot
Storleksguide



Välj rätt fotstorlek
med vår digitala
storleksguide!

Kategori	Storlek (cm)	23			24			25			26			27			28			29		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
P3	Max 60 kg/130 lbs	81	95	111	82	95	111															
P4	Max 80 kg/175 lbs	81	95	111	82	96	112	80	104	120	90	106	122	88	106	122	89	109	125	92	109	125
P5	Max 100 kg/220 lbs	81	96	112	82	97	113	80	105	121	90	106	122	88	107	123	89	110	126	92	111	127
P6	Max 125 kg/275 lbs							80	106	122	90	107	123	88	107	123	89	112	128	92	112	128
P7	Max 150 kg/330 lbs										90	108	124	88	108	124	89	113	129	92	113	129

Storleksguide

Category	Foot size (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg/130 lbs	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg/175 lbs	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg/220 lbs	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg/275 lbs			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg/330 lbs				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

Hur du beställer

För vänster eller höger, lägg till L eller R efter artikelnumret. Exempel: H100-426L

För kaukasisk hudton lägg till FC. För brun hudton lägg till FB. Exempel: H100-426L-FB