

# Xtend® Connect

## Technische Daten

Xtend Connect ist ein patentierter Schnell-Wechsel-Adapter, der es dem Benutzer ermöglicht, seine Prothese in Teile zu zerlegen, um den Fuß-, Schuh- oder Hosenwechsel zu erleichtern, komfortabler zu Sitzen oder einfach nur Platz zu sparen, zum Beispiel auf Reisen. Ansonsten funktioniert Xtend Connect wie jeder andere Adapter und verfügt über die gängigsten Kombinationen, die für die meisten Prothesenprodukte auf dem Markt geeignet sind.

### Doppelverriegelung

Xtend Connect ist das einzige Produkt auf dem Markt, das über eine doppelte Sicherheitsverriegelungsfunktion verfügt, mit einem Sicherheitsknopf und einem Feststellrad. Dies gewährleistet eine sichere Anwendung



### Patientengewicht

Das zulässige Patientengewicht beträgt 150 kg. Überprüfen Sie immer das Gewicht des Patienten. Das maximal zulässige Gewicht darf nicht überschritten werden.

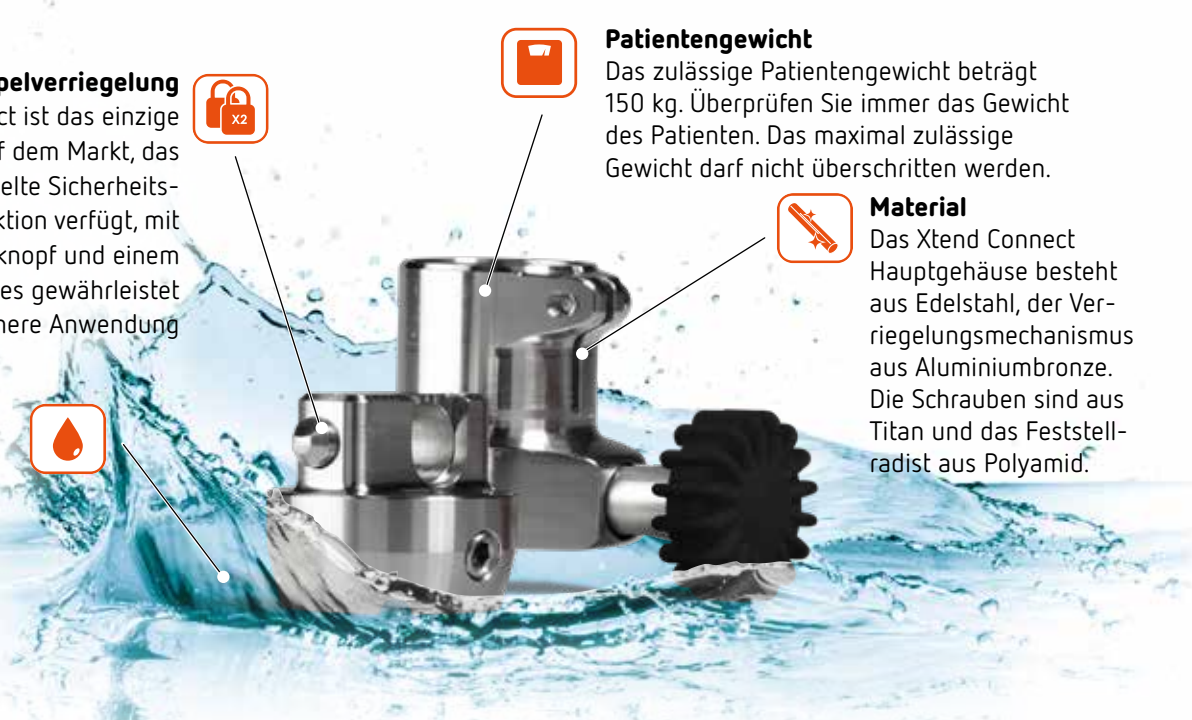


### Material






Das Xtend Connect Hauptgehäuse besteht aus Edelstahl, der Verriegelungsmechanismus aus Aluminiumbronze. Die Schrauben sind aus Titan und das Feststellrad aus Polyamid.

### Wasserdicht

Alle Teile von Xtend Connect sind für den Einsatz in Salz-, Chlor- und Süßwasser geeignet.



### Schnellkupplungen und basiskomponenten

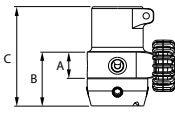
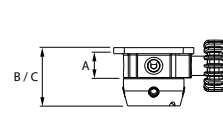
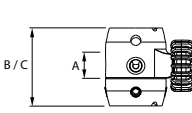
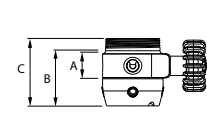
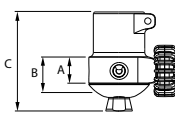
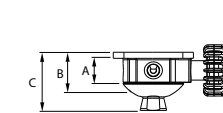
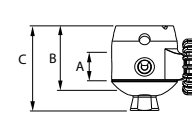
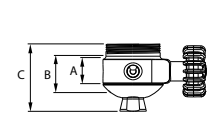
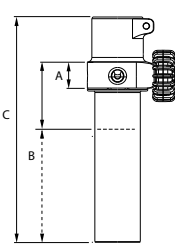
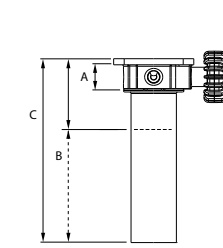
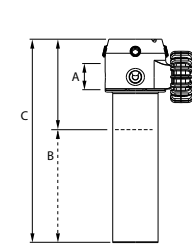
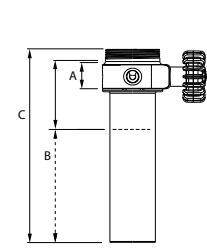
Artikelnummer	Beschreibung
 A100-Q30-150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm, 150 kg.
 A100-Q4-150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-fach-Adapter, 150 kg
 A100-QF-150	Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenadapter mit Buchse, 150 kg
 A100-QP-150	Xtend® Connect Schnellkupplung für Schraubadapter, 150 kg
 A100-BF-150	Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter mit Buchse, 150 kg
 A100-BM-150	Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter mit Stecker, 150 kg
 A100-B30-150	Xtend® Connect Basiskomponente mit 30 mm Rohr, 150 kg <b>NEU!</b>

### Xtend Connect Konfigurator



Finden Sie heraus, welche Komponenten Sie benötigen – mit unserem digitalen Connect Auswahltool!

# Technische Daten – Kombinationen

	<b>Q30</b> Schnellkupplung, Rohrklemme 30 mm	<b>Q4</b> Schnellkupplung, 4-fach-Adapter	<b>QF</b> Schnellkupplung, Pyra- midenadapter mit Buchse	<b>QP</b> Schnellkupplung, für Schraubadapter
<b>BF</b> Basiskomponente, Pyramidenadapter mit Buchse	 A:19 D:208 B:36 E:330 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:314 C:39	 A:19 D:208 B:52 E:303 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:299 C:44
<b>BM</b> asiskomponente, Pyramidenadap- ter mit Buchse	 A:19 D:208 B:23 E:299 C:66	 A:19 D:208 B:26 E:314 C:39	 A:19 D:208 B:39 E:279 C:52	 A:19 D:208 B:24 E:274 C:44
<b>B30</b> Basiskomponen- te, 30 mm Rohr	 A:19 D:208 B:49-149* E:490* C:179	 A:19 D:208 B:52-152* E:519* C:152	 A:19 D:208 B:65-165* E:514* C:165	 A:19 D:208 B:51-151* E:470* C:165

**A** Funktionshöhe in mm **B** Effektive Höhe in mm **C** Gesamthöhe in mm **D** Effektives Gewicht in g **E** Gesamtgewicht in g  
\*B30: Effektive Höhe und effektives Gewicht variieren, da das Rohr um bis zu 100 mm gekürzt werden kann.

## Bestellung

Xtend Connect wird standardmäßig mit schwarzem Feststellrad geliefert. Für ein orangefarbenes Feststellrad fügen Sie als Suffix -O hinzu. Für Intensivsportler beträgt das maximale Gewicht 100 kg.