

Xtend® Connect

Technische Daten

Xtend Connect ist ein patentierter Schnell-Wechsel-Adapter, der es dem Benutzer ermöglicht, seine Prothese in Teile zu zerlegen, um den Fuß-, Schuh- oder Hosenwechsel zu erleichtern, komfortabler zu sitzen oder einfach nur Platz zu sparen, zum Beispiel auf Reisen. Ansonsten funktioniert Xtend Connect wie jeder andere Adapter und verfügt über die gängigsten Kombinationen, die für die meisten Prothesenprodukte auf dem Markt geeignet sind.

Doppelverriegelung

Xtend Connect ist das einzige Produkt auf dem Markt, das über eine doppelte Sicherheitsverriegelungsfunktion verfügt, mit einem Sicherheitsknopf und einem Feststellrad. Dies gewährleistet eine sichere Anwendung.



Patientengewicht

Das zulässige Patientengewicht beträgt 150 kg. Überprüfen Sie immer das Gewicht des Patienten. Das maximal zulässige Gewicht darf nicht überschritten werden.

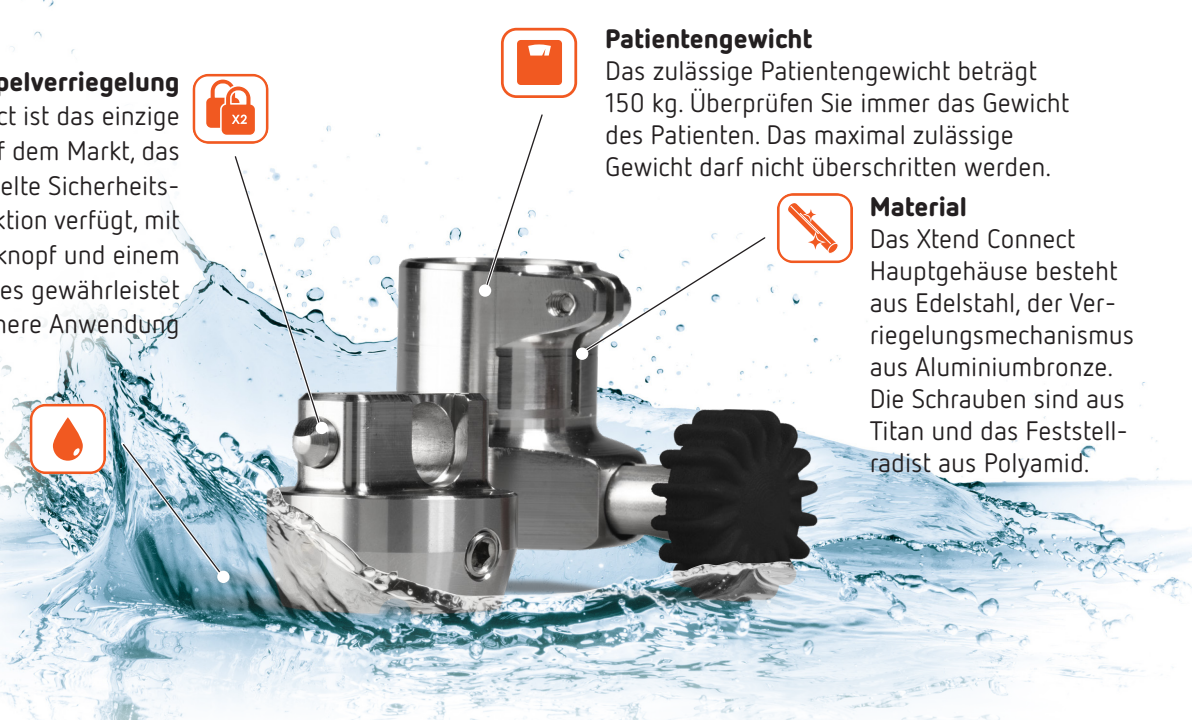


Material

Das Xtend Connect Hauptgehäuse besteht aus Edelstahl, der Verriegelungsmechanismus aus Aluminiumbronze. Die Schrauben sind aus Titan und das Feststellrad aus Polyamid.

Wasserdicht

Alle Teile von Xtend Connect sind für den Einsatz in Salz-, Chlor- und Süßwasser geeignet.



Schnellkupplungen und basiskomponenten

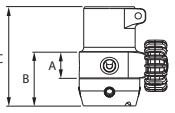
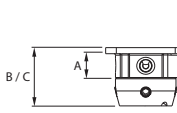
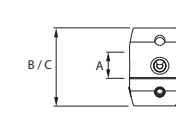
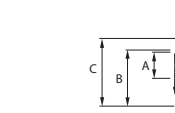
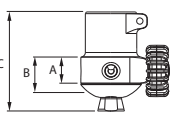
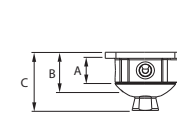
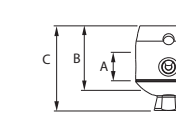
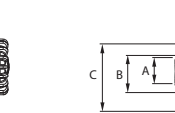
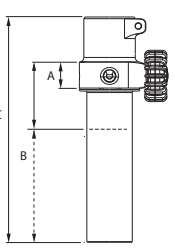
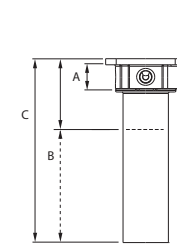
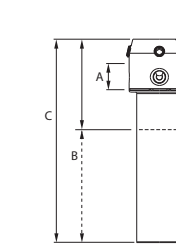
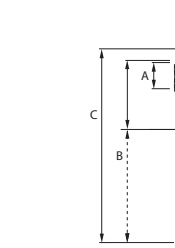
| | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---------------|---|
|  | A100-Q30-150 | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm, 150 kg. |
|  | A100-Q4-150 | Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, 150 kg |
|  | A100-QF-150 | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Buchse, 150 kg |
|  | A100-QP-150 | Xtend® Connect Schnellkupplung für Schraubadapter, 150 kg |
|  | A100-BF-150 | Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Buchse, 150 kg |
|  | A100-BM-150 | Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen-Adapter mit Stecker, 150 kg |
|  | A100-B30-150 | Xtend® Connect Basiskomponente mit 30 mm Rohr, 150 kg NEU! |

Xtend Connect Konfigurator



Finden Sie heraus, welche Komponenten Sie benötigen – mit unserem digitalen Connect Auswahltool!

Technische Daten – Kombinationen

| | Q30 Schnellkupplung mit Rohrklemme 30 mm | Q4 Schnellkupplung, mit 4-Loch-Adapter | QF Schnellkupplung mit Pyramidenbuchsen | QP Schnellkupplung für M 36 Schaftadapter |
|--|---|---|---|---|
| BF Basiskomponente mit Pyramidenbuchsen |  A:19 D:208 B:36 E:330 C:66 |  A:19 D:208 B:39 E:314 C:39 |  A:19 D:208 B:52 E:303 C:52 |  A:19 D:208 B:37 E:299 C:44 |
| BM Basiskomponente mit Pyramidenstecker |  A:19 D:208 B:23 E:299 C:66 |  A:19 D:208 B:26 E:314 C:39 |  A:19 D:208 B:39 E:279 C:52 |  A:19 D:208 B:24 E:274 C:44 |
| B30 Basiskomponente, 30 mm Rohr |  A:19 D:208 B:49-149* E:490* C:179 |  A:19 D:208 B:52-152* E:519* C:152 |  A:19 D:208 B:65-165* E:514* C:165 |  A:19 D:208 B:51-151* E:470* C:165 |

A Funktionelle Höhe in mm **B** Effektive Höhe in mm **C** Gesamthöhe in mm **D** Effektives Gewicht in g **E** Gesamtgewicht in g
*B30: Effektive Höhe und effektives Gewicht variieren, da das Rohr um bis zu 100 mm gekürzt werden kann.

Bestellung

Xtend Connect wird standardmäßig mit schwarzem Feststellrad geliefert. Für ein orangefarbenes Feststellrad fügen Sie als Suffix -O hinzu. Für Intensivsportler beträgt das maximale Gewicht 100 kg.