

Xtend® Connect

Teknisk specifikation

Xtend Connect är en patenterad snabbkoppling. Den hjälper användaren ta isär sina proteskomponenter för att göra det lättare att byta fötter, byta byxor eller bara för att spara plats, till exempel vid resor. Xtend Connect fungerar som vilken adapter som helst och passar övriga komponenter på protesmarknaden.

Dubbel säkerhet

Xtend Connect är den enda snabbkopplingen med dubbel låsfunktion (säkerhetstryckknapp och låshjul). Detta garanterar säker användning.



Patientvikt

Maximal patientvikt är 150 kg och får ej överskridas. Kontrollera alltid användarens vikt.



Material








Xtend Connect är gjord av syrafast rostfritt stål, skruvar av titan och låshjul i polyamid.

Vattensäker

Alla delar kan användas i pool, salt- och sötvatten.



Snabbfästen och basdelar

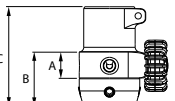
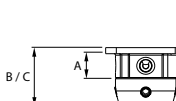
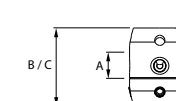
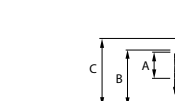
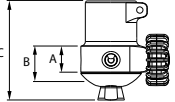
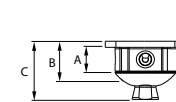
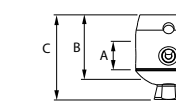
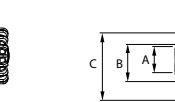
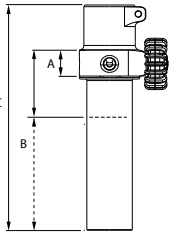
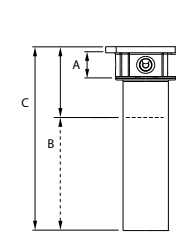
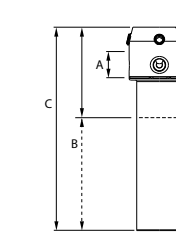
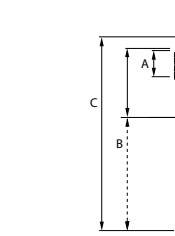
	Artikelnummer	Beskrivning
	A100-Q30-150	Xtend® Connect snabbfäste med rörklämma 30 mm. 150 kg
	A100-Q4-150	Xtend® Connect snabbfäste med 4-hålsadapter. 150 kg
	A100-QF-150	Xtend® Connect snabbfäste med honpyramidadapter. 150 kg
	A100-QP-150	Xtend® Connect snabbfäste med gängadapter. 150 kg
	A100-BF-150	Xtend® Connect basdel med honpyramidadapter. 150 kg
	A100-BM-150	Xtend® Connect basdel med hanpyramidadapter. 150 kg
	A100-B30-150	Xtend® Connect basdel med 30 mm rör, 150 kg NY!

Xtend Connect Configurator



Scanna QR-koden och använd vår konfigurator för att se vilka komponenter du behöver!

Tekniska fakta – kombinationer

	Q30 Snabbfäste med rörklämma 30 mm	Q4 Snabbfäste med 4-hålsadapter	QF Snabbfäste med honpyramidadapter	QP snabbfäste med gängadapter
BF Basdel med honpyramidadapter	 A:19 D:208 B:36 E:330 C:66	 A:19 D:208 B:39 E:314 C:39	 A:19 D:208 B:52 E:303 C:52	 A:19 D:208 B:37 E:299 C:44
BM Basdel med han- pyramidadapter	 A:19 D:208 B:23 E:299 C:66	 A:19 D:208 B:26 E:314 C:39	 A:19 D:208 B:39 E:279 C:52	 A:19 D:208 B:24 E:274 C:44
B30 basdel med 30 mm rör	 A:19 D:208 B:49-149* E:490* C:179	 A:19 D:208 B:52-152* E:519* C:152	 A:19 D:208 B:65-165* E:514* C:165	 A:19 D:208 B:51-151* E:470* C:165

A Funktionell höjd i mm **B** Effektiv höjd i mm **C** Total höjd i mm **D** Effektiv vikt i g **E** Total vikt i g

*B30: Anpassbar effektiv höjd och vikt då röret kan kapas av med upp till 100 mm.

Så här beställer du

Xtend Connect levereras med svart låshjul som standard. För orange låshjul lägg till -O som suffix till artikelnumret. Maximal vikt är 150kg, Kontrollera alltid att patientens vikt är korrekt. Vid högintensivt sport-utövande är den maximala patientvikten 100 kg.