

## Xtend® Foot H100

# Technische Daten / Spezifikation

Der Xtend Foot ist ein patentierter Prothesenfuß, der mit seinen 17 Grad an Flexibilität fast wie ein natürlicher Fuß funktioniert. Das bestimmende Merkmal des Xtend Foot ist seine überragende seitliche Beweglichkeit und damit ein sicherer Ausgleich auf unebenem Untergrund. Ein tief liegender Schwerpunkt sorgt für eine unvergleichbare Stabilität. Dies verdankt er seinem einzigartigen Mix aus anpassungsfähigen und flexiblen Glas- und Carbonfasern, einem Material, das für seine Fähigkeit zur Energierückgabe bekannt ist.



### Gewicht

Leichtbauweise –  
z.B. Größe P426 = 399 gr.



### Montage

Universelle Adapter-  
pyramide, passend für  
Standartkomponenten auf  
dem Markt.

### Wasserfest

Garantierte Beständigkeit  
gegenüber Frisch-, Pool-  
und Salzwasser.



### Materialien

Glas- und Carbonfaser,  
Titan.

### Flexibilität

17° inversion  
17° eversion,  
– vergleichbar mit einem  
menschlichen Fuß.



### Garantie

Xtend Foot - 36 Monate  
Fuß-Kosmetik - 9 Monate



### Max. Anwendergewicht

Bis 150 kg / Größenkategorie P7)



### Alles in Einem


Xtend Foot hat keine lose Teile.



### Bei Lieferung vormontiert

Xtend Foot, Fußkosmetik und schwarz  
Spektrasocke bereits angebracht.

# Technische Angaben Xtend® Foot H100

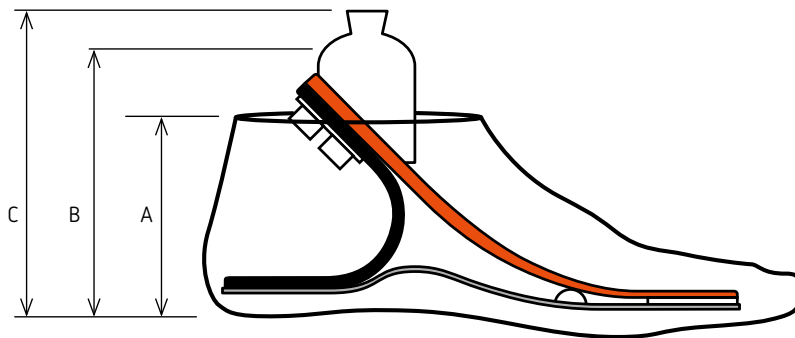

- A Höhe der Fußkosmetik in mm
- B Aufbauhöhe in mm
- C Gesamthöhe in mm

Xtend Foot –  
Auswahlhilfe



Finden Sie die perfekte Passform mit unserem digitalen Fuß-Auswahlhilfe!

Kategorie	Fußgröße (cm)	23			24			25			26			27			28			29			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
P3	Max 60 kg	72	104	119	69	102	116																
P4	Max 80 kg	72	105	119	69	102	117	76	112	126	82	115	130	84	116	131	87	117	132	86	118	132	
P5	Max 100 kg	72	106	120	69	103	118	76	112	127	82	116	131	84	116	131	87	119	134	86	120	134	
P6	Max 125 kg							76	114	128	82	116	131	84	117	132	87	120	135	86	121	136	
P7	Max 150 kg										82	115	130	84	116	131	87	121	136	86	121	136	

## Größentabelle

Kategorie	Fußgröße (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

## So bestellen Sie

Für links oder rechts, fügen Sie L oder R nach dem Artikelcode hinzu. Beispiel: H100-426L

Zur Farbauswahl Suffix hinzufügen; Hautfarbe FC, Braun FB, Hellbraun FT, Schwarz FJ. Zum Beispiel: H100-426L-FB