

# Xtend® Foot H100

## Spécification des données techniques

Xtend Foot est une prothèse de pied qui, avec ses 17 degrés de flexibilité, fonctionne presque comme un pied humain. La caractéristique déterminante de Xtend Foot est sa mobilité latérale supérieure, une compensation sûre sur les surfaces inégales. Un centre de gravité bas assure une stabilité inégalée. C'est grâce à son mélange unique de l'adaptable et flexible la fibre de verre et la fibre de carbone, un matériau connu pour sa capacité à créer un retour d'énergie.



### Poids

Construction légère.

Ex: Taille P426 = 399 grammes/0,88 lbs



### Montage

Adaptateur pyramidal universel qui s'adapte à tous les composants standard du marché.

### Étanche

Garanti en eau douce, de piscine et salée.



### Matériel

Fibre de verre, fibre de carbone et titane.

### Souple

17° d'inversion  
17° d'éversion  
– comparable à un pied humain.



### Garantie

Xtend Foot - 36 mois.  
Esthétique du pied - 9 mois



### Poids max patient

150 kg / 339 lbs (size category P7).



### Une unité


Xtend Foot n'a pas de pièces détachées.



### Dans la boîte

Livré avec esthétique de pied en élastomère thermoplastique et chaussette spectra noire.

# Données techniques Xtend® Foot H100

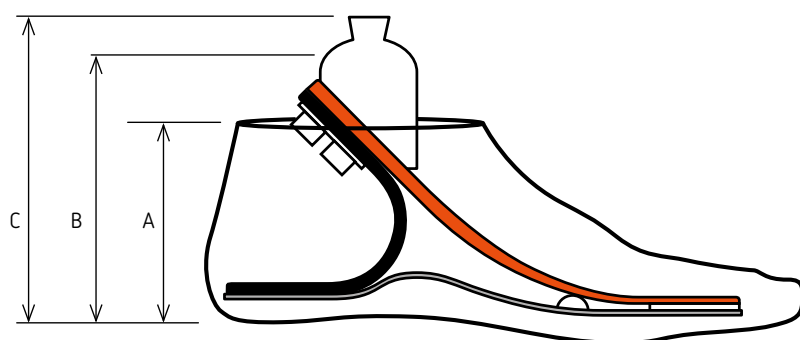

- A Chaussette estétique, hauteur en mm
- B Hauteur libre en mm
- C Hauteur totale en mm

Guide de sélection Xtend Foot



Trouvez le modèle parfait avec notre outil en internet!

Catégorie	Taille de pied (cm)	23			24			25			26			27			28			29		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
P3	Max 60 kg	72	104	119	69	102	116															
P4	Max 80 kg	72	105	119	69	102	117	76	112	126	82	115	130	84	116	131	87	117	132	86	118	132
P5	Max 100 kg	72	106	120	69	103	118	76	112	127	82	116	131	84	116	131	87	119	134	86	120	134
P6	Max 125 kg							76	114	128	82	116	131	84	117	132	87	120	135	86	121	136
P7	Max 150 kg										82	115	130	84	116	131	87	121	136	86	121	136

## Guide des tailles

Catégorie	Taille de pied (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

## Comment commander

Pour gauche ou droite, ajoutez L ou R après le code d'article. Exemple: H100-426L

Pour l'esthétique de pied Caucasic (CAUC), Tan (TAN), Brown (BWN) ou Jet Black (BLJ) comme suffixe.

Exemple: XH100-426L-TAN