

Xtend® Foot Fri

Amorti/Torsion sur tout type de terrain



Choc vertical

Absorbe les chocs pour des pas plus fluides et plus confortables.



Torsion

Mouvement de rotation fluide de $\pm 15^\circ$.



Étanche

Garanti en eau douce, de piscine et salée.



Conception fine


Design pyramidal compact pour un ajustement discret.

Libérez votre mouvement avec le Xtend Foot Fri

Le Xtend Foot Fri est un pied prothétique de nouvelle génération intégrant amortisseur de chocs et absorbeur de torsion, conçu pour offrir une mobilité de haute performance avec un design acéré.

Grâce à son amortisseur de chocs et son absorbeur de torsion intégrés, le Xtend Foot Fri réduit les forces d'impact et le stress rotationnel sur le membre résiduel — facilitant un mouvement plus fluide et naturel. Il offre également 17 degrés de flexibilité latérale (inversion et éversion), améliorant l'équilibre et le confort sur les terrains irréguliers et dans les environnements actifs. Sa faible hauteur de construction en fait une excellente option pour les utilisateurs ayant un encombrement limité, facilitant l'alignement prothétique et améliorant l'ajustement anatomique.

Que ce soit pour les routines quotidiennes ou des défis physiques plus exigeants, le Xtend Foot Fri donne aux utilisateurs des pas confortables et assurés — à chaque fois.

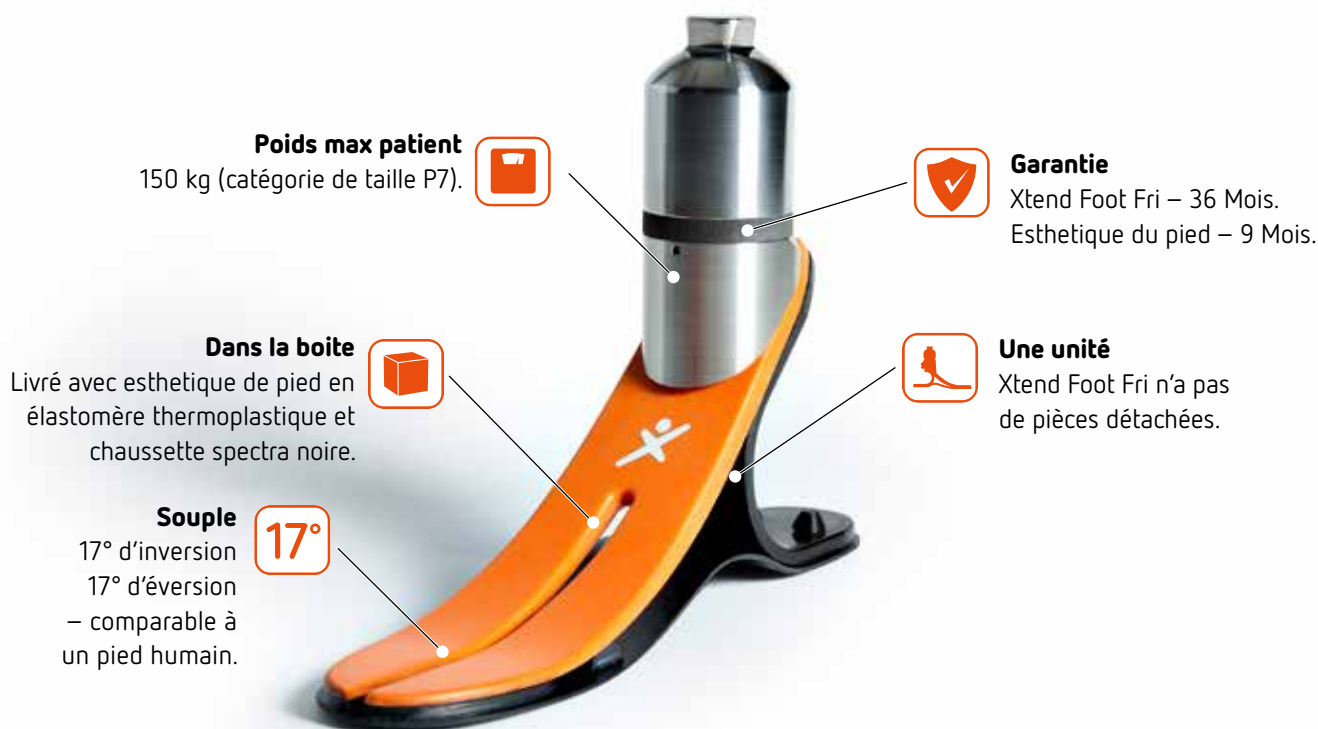

Poids max patient
150 kg (catégorie de taille P7).



Garantie
Xtend Foot Fri – 36 Mois.
Esthétique du pied – 9 Mois.

Dans la boîte
Livré avec esthétique de pied en élastomère thermoplastique et chaussette spectra noire.



Une unité
Xtend Foot Fri n'a pas de pièces détachées.

Souple
17° d'inversion
17° d'éversion
– comparable à un pied humain.

17°

Pour une bonne adaptation

Le Xtend Foot Fri est destiné aux personnes ayant subi une amputation au-dessus ou en dessous du genou et qui maintiennent régulièrement un niveau d'activité modéré à élevé (K3–K4), notamment à l'extérieur et sur des terrains irréguliers. Ce pied prothétique convient aux amputés unilatéraux et bilatéraux, jusqu'à 150 kg.

Catégorie	Taille de pied (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB*	H100-727-STB*	H100-728-STB*	H100-729-STB*

* lancement ultérieur