


# Xtend® Foot Fri H100 - Schock/Torsion

## Technische Daten / Spezifikation

Der Xtend Foot Fri ist ein Hochleistungsprothesenfuß mit integrierter Schockabsorption und Torsionsrotation, welche sowohl die Belastung, als auch den Stress auf den Stumpf verringert und somit zu einem sanfteren und natürlicherem Gangbild führt. Er bietet 17° laterale Flexibilität für Stabilität auf unebenem Gelände. Dank seines schlanken Profils eignet er sich ideal für Anwender mit einem eingeschränktem Bewegungsfreiraum. Gefertigt aus einem hochwertigem anpassungsfähigem Glas- und Kohlefaserverbund, bietet er eine ausgezeichnete Energierückgabe und einen niedrigen Schwerpunkt – für selbstbewusste, komfortable Schritte im Alltag und bei aktiver Nutzung.

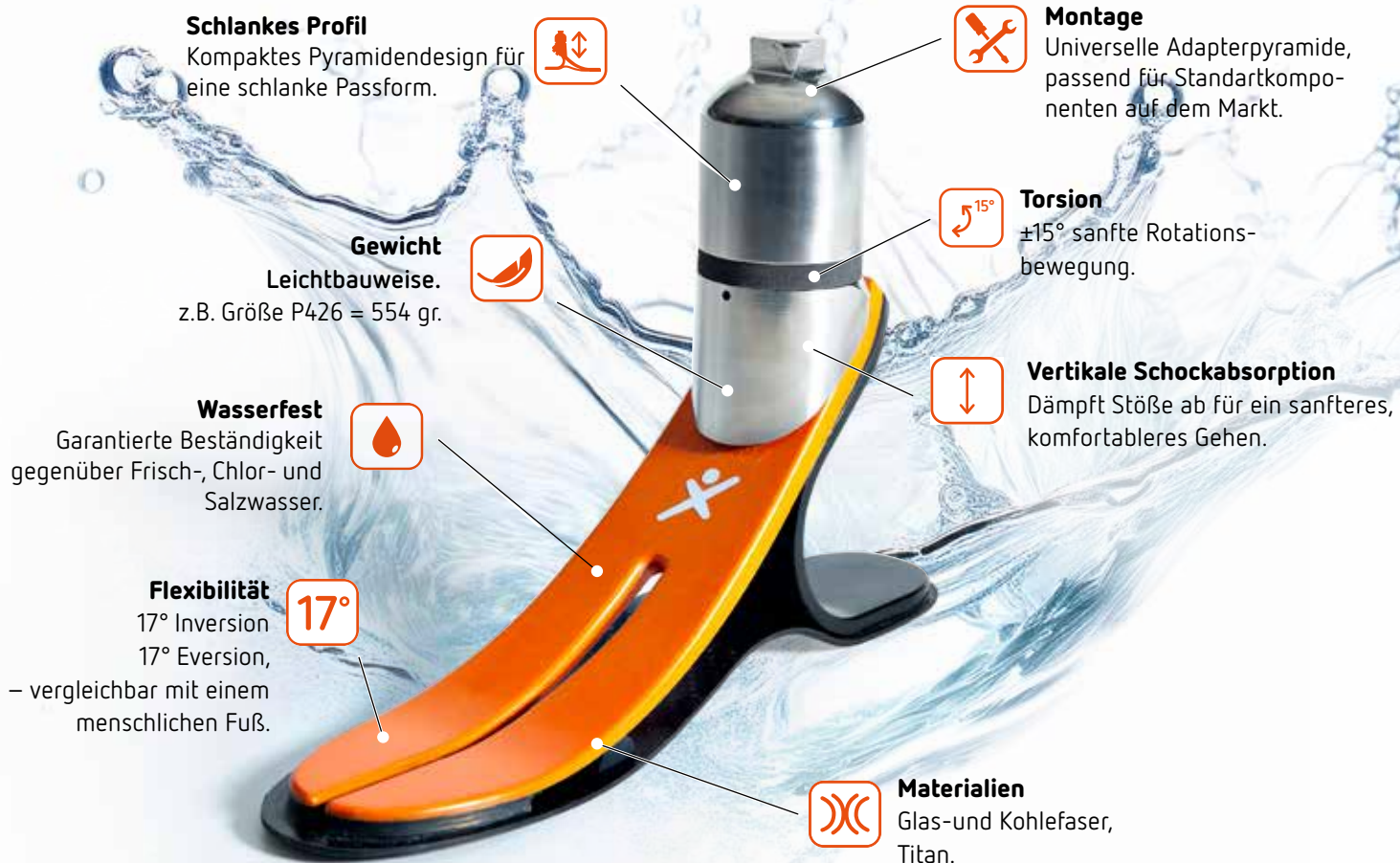

### Schlankes Profil

Kompaktes Pyramidendesign für eine schlanke Passform.



### Montage

Universelle Adapterpyramide, passend für Standardkomponenten auf dem Markt.

### Gewicht

Leichtbauweise.

z.B. Größe P426 = 554 gr.



### Torsion

±15° sanfte Rotationsbewegung.

### Wasserfest

Garantierte Beständigkeit gegenüber Frisch-, Chlor- und Salzwasser.



### Vertikale Schockabsorption

Dämpft Stöße ab für ein sanfteres, komfortableres Gehen.

### Flexibilität

17° Inversion

17° Eversion,

– vergleichbar mit einem menschlichen Fuß.



### Materialien

Glas- und Kohlefaserverbund, Titan.



### Garantie

Xtend Foot Fri - 36 Monate.  
Fuß-Kosmetik - 9 Monate.



### Max. Anwendergewicht

Bis 150 kg / Größenkategorie P7).



### Alles in Einem


Der Xtend Foot Fri besitzt keine losen Teile.



### Bei Lieferung vormontiert

Xtend Foot Fri, Fußkosmetik und eine schwarze Spectrasocke sind bereits angebracht.

# Technische Angaben Xtend® Foot Fri H100

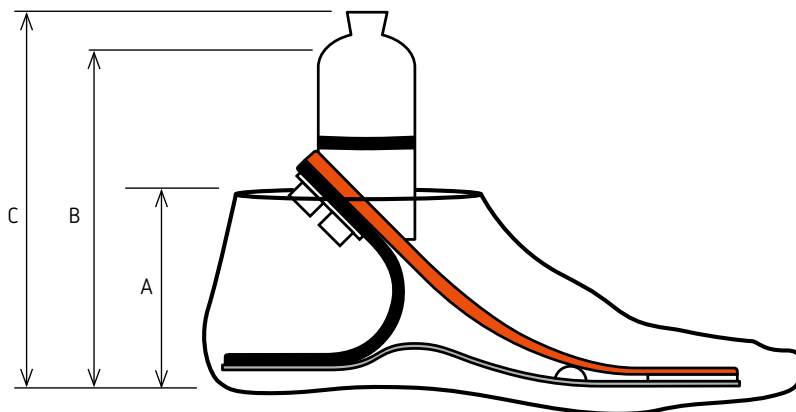

A Höhe der Fußkosmetik in mm  
 B Aufbauhöhe in mm  
 C Gesamthöhe in mm

Kategorie	Fußgröße (cm)	23			24			25			26			27			28			29		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
P3	Max 60 kg	72	142	157	69	142	157															
P4	Max 80 kg	72	142	157	69	143	158	76	151	166	82	153	168	84	154	169	87	155	170	86	156	171
P5	Max 100 kg	72	143	158	69	144	159	76	152	167	82	153	169	84	154	169	87	157	172	86	158	173
P6	Max 125 kg							76	153	168	82	154	169	84	154	169	87	159	173	86	159	174
P7	Max 150 kg										82	155	170	84	155	170	87	160	174	86	160	175

## Größentabelle

Kat.	Fußgröße (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg/130 lbs	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg/175 lbs	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg/220 lbs	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg/275 lbs			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg/330 lbs				H100-726-STB*	H100-727-STB*	H100-728-STB*	H100-729-STB*

\* Spätere Markteinführung

## So bestellen Sie

Zur Farbauswahl Suffix hinzufügen; Hautfarbe FC, Braun FB, Hellbraun FT, Schwarz FJ

Beispiel: H100-426-STY-FBL

Für links oder rechts, fügen Sie L oder R nach dem Artikelcode hinzu. Beispiel: H100-426-STY-FBL.