


Xtend® Foot Fri H100 - Chok/Torsion


Spécification des données techniques


Le Xtend Foot Fri est un pied prothétique haute performance avec amortisseur de chocs et absorbeur de torsion intégrés, réduisant l'impact et le stress sur le membre résiduel pour un mouvement plus fluide et plus naturel. Il offre 17° de flexibilité latérale pour une stabilité sur les terrains irréguliers, et son design profilé convient aux utilisateurs ayant un espace limité. Fabriqué en fibre de verre et en fibre de carbone de haute qualité, il offre un excellent retour d'énergie et un centre de gravité bas - permettant des pas sûrs et confortables dans la vie quotidienne comme dans les environnements actifs.




 **Garantie**
Xtend Foot Fri - 36 mois.
Esthétique du pied - 9 mois

 **Poids max patient**
150 kg (catégorie de taille P7).

 **Une unité**
Xtend Foot Fri n'a pas de pièces détachées.

 **Dans la boîte**
Livré avec esthétique de pied en élastomère thermoplastique et chaussette spectra noire.

Données techniques Xtend Foot® Fri H100

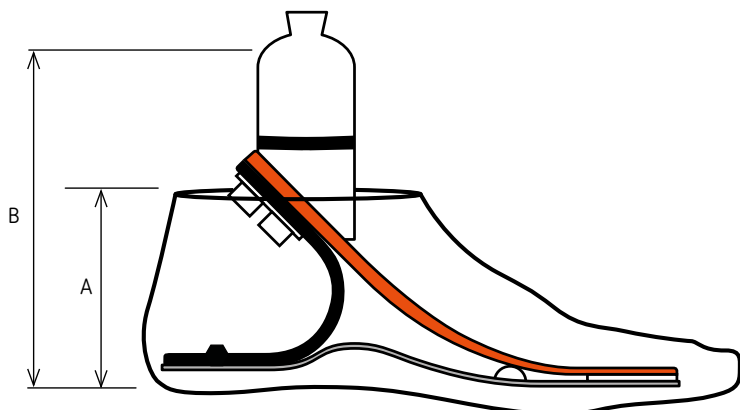

A Chaussette esthétique, hauteur en mm
B Hauteur libre en mm



* Amortisseur de chocs verticaux et de torsion

		Taille de pied (cm)													
		23		24		25		26		27		28		29	
Catégorie		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg / 130 lbs	72	142	70	142										
P4	Max 80 kg / 175 lbs	72	142	70	143	76	151	82	153	84	154	86	155	87	156
P5	Max 100 kg / 220 lbs	72	143	70	144	76	151	82	153	84	154	86	157	87	158
P6	Max 125 kg / 275 lbs					76	153	82	153	84	154	86	159	87	159
P7	Max 150 kg / 330 lbs							82	153	84	153	86	160	87	161

Intéressés?



Scannez le QR code pour en savoir plus sur Xtend Foot Fri.

Guide des tailles

Cat.		Taille de pied (cm)							
		23	24	25	26	27	28	29	
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW						
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY	
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG	
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR	
P7	Max 150 kg				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB	

Comment commander

Pour l'esthétique de pied Caucasican (FC), Tan (FT), Braun (FB) ou Jet Black (FJ) comme suffixe
Exemple: H100-426-STY-FB.

Pour gauche ou droite, ajoutez L ou R après le code d'article. Exemple: H100-426-STY-FBL.