

# Xtend® Foot Fri H100 - Shock/Torsione

## Specifiche Tecniche

Xtend Foot Fri è un piede protesico ad alte prestazioni con assorbimento degli urti integrato e rotazione torsionale, che riduce l'impatto e lo stress sull'arto residuo per un movimento più fluido e naturale. Offre 17° di flessibilità laterale per garantire stabilità su terreni irregolari, e il suo design a profilo sottile è adatto per utenti con spazio limitato. Realizzato con fibre di vetro e carbonio di alta qualità e adattabili, fornisce un eccellente ritorno di energia e un baricentro basso, facilitando passi sicuri e confortevoli nella vita quotidiana e in ambienti attivi.



### Struttura sottile

Design compatto a piramide per una calzata elegante.



### Peso

Struttura leggera.  
Es: Misura P426 = 554 gr.



### Impermeabilità

Garantita per uso in acqua dolce, salata e in piscina.



### Flessibilità

17° di inversione  
17° di eversione  
– paragonabile a un piede umano.



### Montaggio

Adattatore piramidale universale compatibile con tutti i componenti standard presenti sul mercato.



### Torsione

Movimento rotazionale fluido  $\pm 15^\circ$ .



### Assorbimento verticale

degli urti Assorbe gli impatti per passi più fluidi e confortevoli.



### Materiale

Fibra di vetro, fibra di carbonio e titanio.



### Garanzia

Xtend Foot Fri – 36 mesi.  
Rivestimento del piede – 9 mesi.



### Peso massimo del paziente

150 kg (categoria di taglia P7).



### Un pezzo unico


Xtend Foot Fri non prevede parti scomponibili.



### Preassemblato al momento della consegna

Xtend Foot Fri, rivestimento del piede e, calzino Spectra già montati.

# Dati Tecnici Xtend Foot® Fri H100

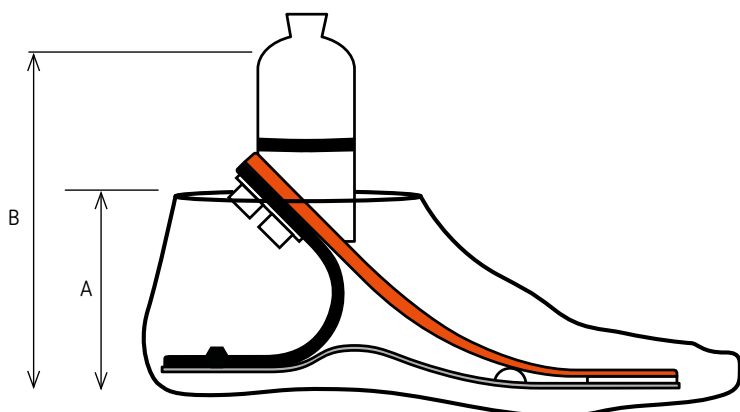

A Altezza della cover (mm)  
B Ingombro totale (mm)

Taglia del piede (cm)		23		24		25		26		27		28		29	
Categoria		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg/130 lbs	72	142	70	142										
P4	Max 80 kg/175 lbs	72	142	70	143	76	151	82	153	84	154	86	155	87	156
P5	Max 100 kg/220 lbs	72	143	70	144	76	151	82	153	84	154	86	157	87	158
P6	Max 125 kg/275 lbs					76	153	82	153	84	154	86	159	87	159
P7	Max 150 kg/330 lbs							82	153	84	153	86	160	87	161

Interessati?



Scansiona il codice QR per saperne di più su Xtend Foot Fri.

## Tabella delle misure

Cat.	Taglia del piede (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB

## Ordinazione

Per rivestimenti del piede caucasici o marroni, aggiungere rispettivamente -FC o -FB come suffisso

Es.: H100-426-STY-FB.

Per il lato sinistro o destro, aggiungere rispettivamente L o R dopo il codice articolo. Es.: H100-426-STY-FBL.