

Xtend® Foot Först H100

Technische Daten / Spezifikation

Der Xtend Foot Först ist ein patentierter Prothesenfuß, der mit seinen 17 Grad an Flexibilität fast wie ein natürlicher Fuß funktioniert. Das bestimmende Merkmal des Xtend Foot Först ist seine überragende seitliche Beweglichkeit und damit ein sicherer Ausgleich auf unebenem Untergrund. Ein tief liegender Schwerpunkt sorgt für eine unvergleichbare Stabilität. Dies verdankt er seinem einzigartigen Mix aus anpassungsfähigen und flexiblen Glas- und Carbonfasern, einem Material, das für seine Fähigkeit zur Energierückgabe bekannt ist.



Gewicht

Leichtbauweise –
z.B. Größe P426 = 399 gr.



Montage

Universelle Adapterpyramide, passend für Standardkomponenten auf dem Markt.

Wasserfest

Garantierte Beständigkeit gegenüber Frisch-, Pool- und Salzwasser.



Materialien

Glas- und Carbonfaser, Titan.

Flexibilität

17° inversion
17° eversion,
– vergleichbar mit einem menschlichen Fuß.



Garantie

Xtend Foot Först - 36 Monate
Fuß-Kosmetik - 9 Monate



Max. Anwendergewicht

Bis 150 kg / Größenkategorie P7)



Alles in Einem


Xtend Foot Först hat keine lose Teile.



Bei Lieferung vormontiert

Xtend Foot Först, Fußkosmetik und schwarzer Spektrastock bereits angebracht.

Technische Angaben Xtend® Foot Först H100

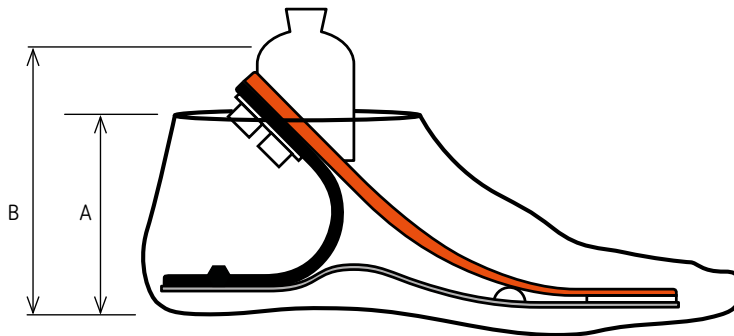

A Höhe der Fußkosmetik in mm
B Aufbauhöhe in mm

Xtend Foot –
Auswahlhilfe



Finden Sie die perfekte Passform mit unserem digitalen Fuß-Auswahlhilfe!

Fußgröße (cm)		23		24		25		26		27		28		29	
Kategorie		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg /130 lbs	72	106	70	107										
P4	Max 80 kg /175 lbs	72	106	70	107	76	115	82	117	84	118	86	120	87	120
P5	Max 100 kg /220 lbs	72	108	70	108	76	116	82	118	84	118	86	122	87	122
P6	Max 125 kg /275 lbs					76	117	82	118	84	118	86	123	87	123
P7	Max 150 kg /330 lbs							82	117	84	118	86	123	87	124

Größentabelle

		Fußgröße (cm)						
Kategorie		23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg	H100-323	H100-324					
P4	Max 80 kg	H100-423	H100-424	H100-425	H100-426	H100-427	H100-428	H100-429
P5	Max 100 kg	H100-523	H100-524	H100-525	H100-526	H100-527	H100-528	H100-529
P6	Max 125 kg			H100-625	H100-626	H100-627	H100-628	H100-629
P7	Max 150 kg				H100-726	H100-727	H100-728	H100-729

So bestellen Sie

Zur Farbauswahl Suffix hinzufügen; Beige FC, Tan FB, Braun FT, Schwarzer FJ. Zum Beispiel: H100-426L-FB
Für links oder rechts, fügen Sie L oder R nach dem Artikelcode hinzu. Beispiel: H100-426-FBL