

Xtend® Foot Fri H100 - Schock/Torsion

Technische Daten / Spezifikation

Der Xtend Foot Fri ist ein Hochleistungsprothesenfuß mit integrierter Schockabsorption und Torsionsrotation, welche sowohl die Belastung, als auch den Stress auf den Stumpf verringert und somit zu einem sanfteren und natürlicherem Gangbild führt. Er bietet 17° laterale Flexibilität für Stabilität auf unebenem Gelände. Dank seines schlanken Profils eignet er sich ideal für Anwender mit einem eingeschränkten Bewegungsfreiraum. Gefertigt aus einem hochwertigem anpassungsfähigem Glas- und Kohlefaserverbund, bietet er eine ausgezeichnete Energierückgabe und einen niedrigen Schwerpunkt – für selbstbewusste, komfortable Schritte im Alltag und bei aktiver Nutzung.



Schlankes Profil

Kompaktes Pyramidendesign für eine schlanke Passform.



Montage

Universelle Adapterpyramide, passend für Standardkomponenten auf dem Markt.

Gewicht

Leichtbauweise.

z.B. Größe P426 = 554 gr.



Torsion

±15° sanfte Rotationsbewegung.

Wasserfest

Garantierte Beständigkeit gegenüber Frisch-, Chlor- und Salzwasser.



Vertikale Schockabsorption

Dämpft Stöße ab für ein sanfteres, komfortableres Gehen.

Flexibilität

17° Inversion

17° Eversion,

– vergleichbar mit einem menschlichen Fuß.



Materialien

Glas- und Kohlefaserverbund, Titan.



Garantie

Xtend Foot Fri - 36 Monate.
Fuß-Kosmetik - 9 Monate.



Max. Anwendergewicht

Bis 150 kg / Größenkategorie P7).



Alles in Einem


Der Xtend Foot Fri besitzt keine losen Teile.



Bei Lieferung vormontiert

Xtend Foot Fri, Fußkosmetik und eine schwarze Spectrasocke sind bereits angebracht.

Technische Angaben Xtend® Foot Fri H100

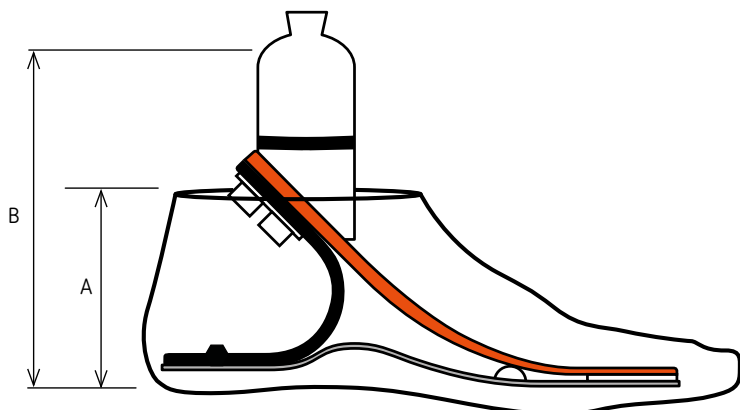

A Höhe der Fußkosmetik in mm
B Aufbauhöhe in mm

Fußgröße (cm)		23		24		25		26		27		28		29	
Kategorie		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
P3	Max 60 kg	72	142	70	142										
P4	Max 80 kg	72	142	70	143	76	151	82	153	84	154	86	155	87	156
P5	Max 100 kg	72	143	70	144	76	151	82	153	84	154	86	157	87	158
P6	Max 125 kg					76	153	82	153	84	154	86	159	87	159
P7	Max 150 kg							82	153	84	153	86	160	87	161

Interessiert?



Scannen Sie den QR-Code, um mehr über Xtend Foot Fri zu erfahren.

Größentabelle

Kat.	Fußgröße (cm)	23	24	25	26	27	28	29
P3	Max 60 kg/130 lbs	H100-323-STW	H100-324-STW					
P4	Max 80 kg/175 lbs	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY
P5	Max 100 kg/220 lbs	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG
P6	Max 125 kg/275 lbs			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR
P7	Max 150 kg/330 lbs				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB

So bestellen Sie

Zur Farbauswahl Suffix hinzufügen; Hautfarbe FC, Braun FB, Hellbraun FT, Schwarzer FJ

Beispiel: H100-426-STY-FBL

Für links oder rechts, fügen Sie L oder R nach dem Artikelcode hinzu. Beispiel: H100-426-STY-FBL.