

Xtend® Foot Fri H100 – Shock/Torsion 技術仕様

Xtend Foot Fri は高性能な義足用足部であり、衝撃吸収機能と回旋機能を統合し、断端への衝撃と負担を軽減し、より滑らかで自然な動きを実現します。内外反17°の柔軟性により不整地での安定性を提供します。低床な設計はクリアランスが限られているユーザーにも適しています。高品質なガラス繊維とカーボンファイバーで作られており、優れたエネルギーリターンと低重心を実現し、日常生活やアクティブな環境で自信を持って快適に歩行できます。



スリムな構造
コンパクトな構造でスマートなフィット感を実現



取付方法
市販されているすべての標準部品に適合するユニバーサルピラミッドアダプター

重量

軽量構造。例：
サイズ P426 = 554 grams/1.22 lbs



回旋機能
±15°の滑らかな回旋機能

防水性

真水、プール、海水での使用が保証されています



垂直方向の衝撃吸収
衝撃を吸収して、より滑らかで快適な歩行を実現

柔軟性

17°の内反・外反 – 人間の足に匹敵します



素材
ガラス繊維、カーボンファイバー、チタン



保証期間

Xtend Foot Fri – 36 か月
フットシェル: – 9 か月



Max weight patient

150 kg/330 ポンド (サイズカテ
ゴリP7)



一体型構造


Xtend Foot Fri は一体型構造です



出荷時に組立済み

Xtend Foot Fri、フットシェル、
Spectraソックスは出荷時すでに
装着済み

Xtend® Foot Fri H100 技術データ

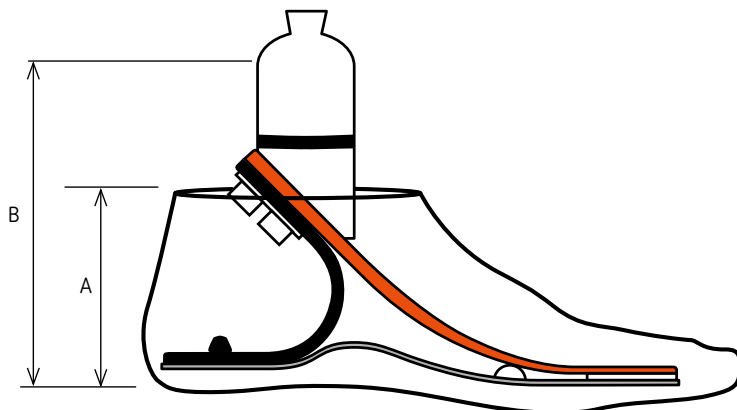

- A フットシェルの高さ (mm)
- B 組立高さ (mm)

		足のサイズ (cm)		23	24	25	26	27	28	29					
分類		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
P3	Max 60 kg/130 lbs	72	142	70	142										
P4	Max 80 kg/175 lbs	72	142	70	143	76	151	82	153	84	154	86	155	87	156
P5	Max 100 kg/220 lbs	72	143	70	144	76	151	82	153	84	154	86	157	87	158
P6	Max 125 kg/275 lbs					76	153	82	153	84	154	86	159	87	159
P7	Max 150 kg/330 lbs							82	153	84	153	86	160	87	161

Interested?



Scan the QR code to learn more about Xtend Foot Fri.

サイズガイド

		足のサイズ (cm)							
分類		23	24	25	26	27	28	29	
P3	Max 60 kg/130 lbs	H100-323-STW	H100-324-STW						
P4	Max 80 kg/175 lbs	H100-423-STY	H100-424-STY	H100-425-STY	H100-426-STY	H100-427-STY	H100-428-STY	H100-429-STY	
P5	Max 100 kg/220 lbs	H100-523-STG	H100-524-STG	H100-525-STG	H100-526-STG	H100-527-STG	H100-528-STG	H100-529-STG	
P6	Max 125 kg/275 lbs			H100-625-STR	H100-626-STR	H100-627-STR	H100-628-STR	H100-629-STR	
P7	Max 150 kg/330 lbs				H100-726-STB	H100-727-STB	H100-728-STB	H100-729-STB	

注文方法

フットシェルの色をご記入ください。肌色 (FC)、ブラウン (FB)、タン (FT) もしくはジェットブラック (FJ)。例 H100-426-STY-FB.

製品番号の後ろに左右 (L or R) をご記入ください。例 H100-426-STY-FBL.